


HAKKO DISPOSABLE EPIDURAL ANESTHESIA SET 医療機器承認番号: 20700BZZ00895A02

HAKKO DISPOSABLE EPIDURAL ANESTHESIA SET 医療機器承認番号: 20700BZZ00895A02

(誤接続防止の新規格コネクタ)

従来のコネクタ
(ISO594※)

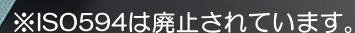

- 八光硬膜外麻酔用コンプリートセットは、ご希望に合わせてセット内容を選択していただくことができます。本カタログの部品リストをご参照いただき、セット内容をご指定ください。
- トレイもダブルトレイやシングルトレイ（大）（中）など数種類より選択いただけます。
- プロテクタースタンドやスポンジブロックの採用により、使い易く、安全なセットをご提供させていただきます。

本製品は、一回限りで再度のご使用は行わないでください。
製品の仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

八光硬膜外麻酔用コンプリートセット構成部品

●トレイ



ダブルトレイ
麻酔用トレイと消毒用トレイが別トレイになっています。



シングルトレイ (大)
麻酔用トレイと消毒用トレイが一つのトレイになっています。

●部品リスト (この部品リストよりセット内容をご指定ください。)

■ は ISO80369-6、■ は従来のコネクタです。

分類	品名	規格・サイズ
基本セット	EF17I-95 (硬膜外針：17G、カテーテル：1.0X950mm、フィルタ)	
	EF18I-95 (硬膜外針：18G、カテーテル：0.8X950mm、フィルタ)	
	E17I-95 (硬膜外針：17G、カテーテル：1.0X950mm)	
	E18I-95 (硬膜外針：18G、カテーテル：0.8X950mm)	
	* 硬膜外麻酔セットのカタログと併せてご覧ください。	
トレイ	ダブルトレイ	
	シングルトレイ (大)	
	シングルトレイ (中)	
オイフ (代表例)	穴付オイフ (撥水性、テープなし)	60×60cm Φ9cm穴
	穴付オイフ (撥水性、テープ付)	90×90cm Φ9×15cm穴
	穴付オイフ (吸水防水性、テープ付)	90×90cm Φ9cm穴
	穴付オイフ (吸水防水性、テープ付)	90×90cm Φ15cm穴
消毒用	OWガーゼ	20×20cm 4折
	OWガーゼ	15×15cm 4折
	アメディーゼ	30×30cm 4折
	スポンジスティック	
	綿球	Φ2.5cm
	綿球	Φ3cm
ラッパー	綿球	Φ4cm
	ラッパー (撥水性)	60×60cm
	ラッパー (撥水性)	90×90cm
	ラッパー (吸水防水)	90×90cm

分類	品名	規格・サイズ
生食カップ	生食カップ	50mL (ブルー)
	生食カップ	60mL
	生食カップ	95mL
LORシリンジ	ロスオブシリンジ (PP)	5mL (スリップ)
シリンジ ISO80369-6 従来のコネクタ	ガラスシリンジ	2mL (スリップ)
	ガラスシリンジ	5mL (スリップ)
	ガラスシリンジ	10mL (スリップ)
	プラスチックシリンジ	5mL (ロック)
	プラスチックシリンジ	10mL (ロック)
	プラスチックシリンジ	5mL (スリップ)
針子類	プラスチックシリンジ	10mL (スリップ)
	綿球把持用鉗子	18.5cm ポイントチップ
	ピンセット	12cm ポイントチップ
シート	クリンリーフ	38×30cm
	シート (撥水性)	90×90cm
	シート (吸水防水)	90×90cm
薬液プラント針 ISO80369-6 従来のコネクタ	採液針	18G
	薬液調整用針	
一般針 麻酔針		23G
		25G
その他部品	針用スポンジブロック*1	
	プロテクタースタンド*2	

包装形態


1箱5セット入、1セット毎ピールオープン包装、EOG滅菌済 ・包装内のトレイはラッパーでラッピングされています。

お願い) 部品リスト以外のご要望につきましては、最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。


従来のコネクタとISO80369-6コネクタの製品は、相互に接続することが出来ません。

※最低発注数量は30セットです。また、箱入数はセット内容によって変更になることがあります。

●針刺事故防止アイテム

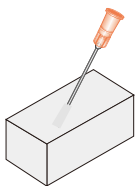

スポンジブロック使用例*1
左図のように、手技中に使用済みになった一般針／麻酔針でスポンジブロックを穿孔してください。一時的に針先をカバーすることができます。
手技終了後は所定の方法により処理をしてください。

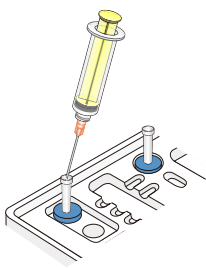

プロテクタースタンド使用例*2
1. 一般針／麻酔針より取り外した針力バーをスタンドに挿入してください。
2. 針付のシリンジを軽く針力バーに挿入してください。
3. 術中に立てた状態にしておく事ができます。