

AQUVAS1 輸液・血液加温器[®]

AQUVAS1 SOLUTION / BLOOD WARMER

医療機器認証番号:301ADBZX00065000

NEW



適 応

輸血・輸液の際の
保存血液、赤血球製剤、薬液の加温

特 長

- 空焚き時安全停止機能や異常高温警告機能等の安全対策機能を搭載しています。
- 従来機に比べ、加温槽内の突起物が極小になり、洗浄等のメンテナンスが容易になりました。
また、加温槽内は次亜塩素酸塩水溶液で消毒可能です。
- フタ側にコイルホルダーがありますので、手を濡らさずにウォーマーコイルを装着でき、使用中はウォーマーコイルの浮き上がりを防ぎます。
- フタのインターロック採用により、安全性・加温精度が向上しています。
- 加温方式は実績のある湿式タイプです。

AQUVAS1 輸液・血液加温器[®]

使用方法

- ① 加温槽に35℃未満の水を入れ、フタをする。
(入れる水量の目安：水位ラインから約1cm下の位置まで)
- ② 安定した場所（台上あるいは点滴スタンド）に本機を設置してから、電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチをONにする。



正確にフタをせず電源をONにすると、エラーになります



10℃の水を使用した場合、約10分で設定温度まで上がります

- ③ 水温を確認する。（温度表示の確認、加温槽に触れる など）
- ④ 加温コイル「ウォーマーコイル M（別売）」に輸血セット、血液回路、輸液セットなどを接続し、コイル内を生理食塩水で満たす。




ボビン付きの「ウォーマーコイル MB」はご使用になれません

- ⑤ 本機の電源を一旦OFFにし、フタのコイルホルダー部に加温コイルを装着（右下図 参照）し、再び本機にフタをして電源をONにする。
- ⑥ 加温槽内の水量と水温を確認してから、輸血または輸液を開始する。
- ⑦ 使用後は、電源をOFFにし、電源プラグを抜く。加温槽内の水を捨て、加温コイルを取り外し、加温槽内を布で拭き乾燥させる。



各部の名称



加温コイル装着向き

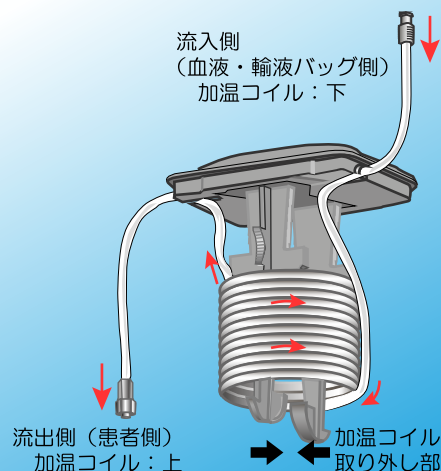

流量と流出温度の関係グラフ（水を用いた参考値）

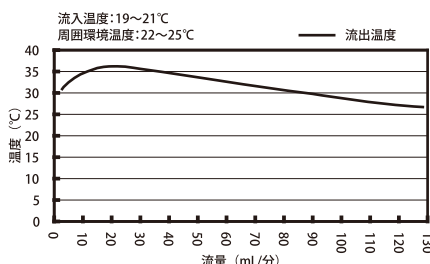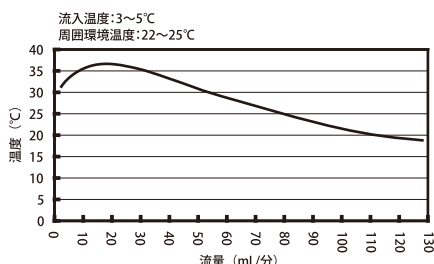

EMC適合 JIS T 0601-1-2 : 2012

ご使用になる前に、製品に添付されている医療機器添付文書ならびに取扱説明書を必ずお読みください。
添付文書には「警告」「禁忌・禁止」「使用上の注意」等が記載されています。

仕様

製品コード (JANコード)	加温方式	設定温度	警告温度	電源	消費電力	寸法	重さ
29050070 (4526737292786)	湿式	37℃(±2℃) (加温槽内)	41℃(±1℃) (警告ブザー)	AC100V(±10%) 50-60Hz	450VA 最大時500VA	幅135×奥行110×高さ255mm (ハンドル部除く)	約1.58kg (本体のみ) 約2.90kg (水を入れた状態)

付属品：スタンド取付金具（フック+ノブ） 1組 / 添付文書・取扱説明書 各1部

※ウォーマーコイル M（加温用コイル）は別売りとなっております。

「AQUVAS1輸液・血液加温器」は株式会社八光の登録商標です。

関連製品



血液・薬液用加温コイル

ウォーマーコイル M

管理医療機器

医療機器承認番号：16300BZZ00940000

- ・AQUVAS1輸液・血液加温器、八光血液加温器HBW-10・HBW-5専用の加温用コイルです。
- ・密着巻きタイプ。
- ・オスアダプター・メスアダプターともにロックタイプのアダプターを使用。確実に接続できます。

仕様

製品コード	サイズ	容量	包装形態
24010110	3.4×5.1×4,200mm（加温部：約3,200mm）	38mL	1箱20個入、1個毎EOG滅菌済

販売窓口 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル ☎(03)5804-8500
ホームページ <http://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 ☎(011)215-1530 横浜 ☎(045)954-2111 名古屋 ☎(052)914-8500 福岡 ☎(092)411-4100
仙台 ☎(022)257-8502 長野 ☎(026)276-3083 大阪 ☎(06)6453-9102 熊本 ☎(096)379-5806
柏 ☎(04)7131-8580 金沢 ☎(076)225-8560 岡山 ☎(086)243-3985 本郷商品管理センター
本郷 ☎(03)5804-8500 静岡 ☎(054)282-4185 松山 ☎(089)935-8517 ☎(03)5840-8502

製造販売

株式会社 八光
メディカル事業部

blakko[®]

〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地

2003(A)