


Mist-less VANSリトラクタセット AKR

MIST-LESS VANS RETRACTOR SET AKR 届出番号：20B1X00005000042 一般医療機器 開創器

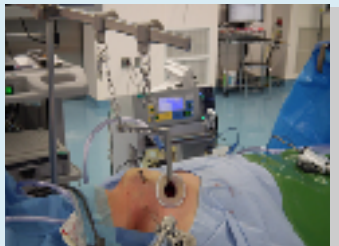

写真提供
 旭川医科大学
 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座 臨床指導教授
 札幌徳洲会病院 耳鼻咽喉科
 部長 片山 昭公先生

用途

- 甲状腺良性腫瘍、パセドウ病、副甲状腺腫過形成等の甲状腺手術

特長

- 吸引管があるため、術野をエナジーデバイスによるミストで遮らない良好視野での手術が可能です。
- 頸部吊り上げ法によるVANS法(Video-Assisted Neck Surgery)に甲状腺用ラッププロテクター®【FF0706S】と併用して使用します(皮切2.5cm～3.5cm)頸部に手術創がないため、術後の引きつれ等の症状が軽減され、整容性向上に期待できます。

<本品はステンレス鋼(ニッケル・クロム含有)>



仕様

※本製品はリユース製品です。

| 製品コード | 規格(同梱物) | 包装形態 |
|----------|---|--------------|
| 29130110 | VANSリトラクタ | 1箱 1台(未滅菌) |
| 29130150 | VANSリトラクタ(腋窩用) | 1箱 1台(未滅菌) |
| 29130130 | スコープガイド (サイズ: φ5.8 x φ7.0 x 37mm 適応スコープ外径: φ5.5mm以下) | 1箱 1本(未滅菌) |
| 29130120 | VANS用支柱セット (支柱,スライドバー,チェーン(2本)ハンドル(3本), スライダー(2本)) | 1箱 1セット(未滅菌) |

- ・本製品は、部品毎での販売となります。
- ・未滅菌の状態での供給となりますので、ご使用前に必ず電子添文に記載された方法にて洗浄・滅菌を行ってください。
- ・金属アレルギーがある患者様への使用はご注意ください。(金属アレルギーが生じる可能性があります。)

ラッププロテクター® LAP PROTECTOR® sタイプ

承認番号：21900BZX00940000 単回使用開創器 管理医療機器

◆併用医療機器◆

| 製品名 | 製品コード | 規格 |
|-------------------------------------|----------|--------------|
| ラッププロテクター | 29150300 | 甲状腺用 FF0706S |
| 包装形態 1箱 2セット入、1セット毎ピールオープン包装、EOG | | |

