

# Vagi-バッグ

製造販売届出番号：20B1X00005000047


## 用途

- 腹腔鏡下手術における組織回収用袋


## 特長

- 扇形状のため、開口部を大きく展開することができます。
- 底部が細くなっているため、体外に取出しやすくなっています。
- ストッパー付きのため、閉口状態を保持することができます。

・本製品をご使用になる前に、必ず製品に添付されています医療機器添付文書をお読みください。

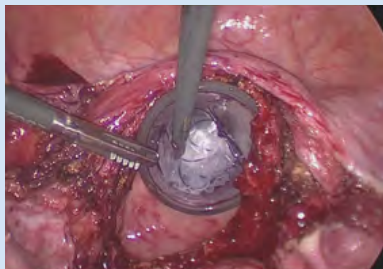

LH: laparoscopic hysterectomy (腹腔鏡下子宮摘出術)

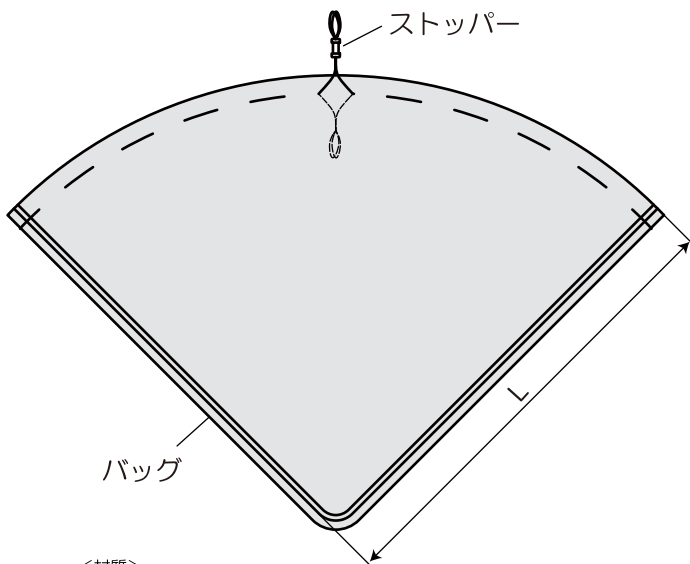


<材質>

- 1) バッグ：内面はポリエチレン、中層はポリアミド、外面はポリエステル
- 2) ストッパー：シリコンゴム
- 3) 糸：ポリアミド

【200mm】



【250mm】

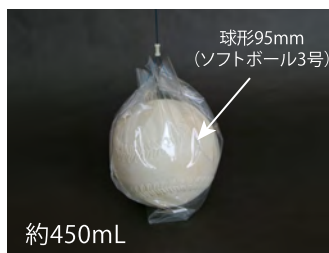

容量：イメージ

## 仕様

製品名	製品コード	タイプ (L)	開口部有効直径	パース容量
Vagi-バッグ	29111120	200mm	約150mm	約450mL (最大)
	29111130	250mm	約200mm	約850mL (最大)

## 包装形態

1箱5枚入り、1枚毎ピールオープン包装、EOG滅菌済