


ボーンニードル Ossiris

医療機器承認番号：21500BZZ00285000

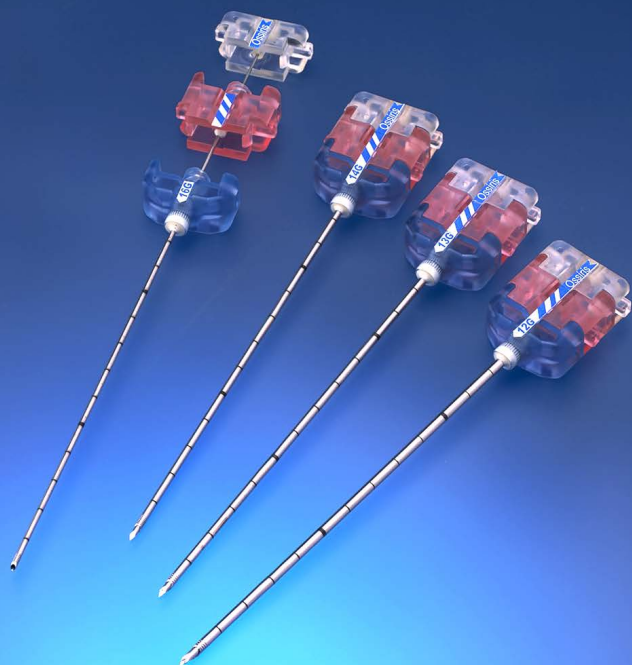

適用

骨生検（骨髄）
薬液等（造影剤、骨補填材等）の注入用

オシリス

特長


- 穿刺針は三重構造です。生検（骨髄）と薬液注入等の手技を1回の刺入で行うことができます。
- 軽量かつ大きめな針基は穿刺時のグリップ性と位置保持に有用です。また、それぞれの針基ワンタッチロックによって固定されています。
- 外針先端の特殊加工は、回しながら刺入することで、骨穿刺を容易にします。
- 穿刺ガイドスタイレットと併用することにより、確実に目的部位へのアプローチができます。

*必要に応じて、生検、薬液注入用シリンジ、薬液注入用エクステンションチューブ、CT下穿刺デバイス（I-1デバイス、KUナビゲーター等）、局麻針等を予めご用意下さい。

仕様

「*」は準規格品です。

製品コード	規格	部品構成	包装形態
22170010	12G×125mm	①②③④⑤⑦	1箱2セット入り 1セット毎ピールトレイ包装 EOG滅菌済
22170020*	12G×125mm、穿刺ガイドスタイレット付	①②③④⑤⑥⑦	
22170030	13G×125mm	①②③④⑤⑦	
22170040*	13G×125mm、穿刺ガイドスタイレット付	①②③④⑤⑥⑦	
22170050	14G×125mm	①②③④⑤⑦	
22170060*	14G×125mm、穿刺ガイドスタイレット付	①②③④⑤⑥⑦	

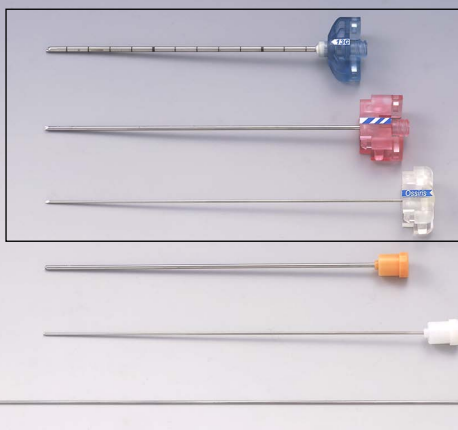

- ① 穿刺針：外針
- ② 穿刺針：中針
- ③ 穿刺針：内針
- ④ 外針用スタイレット（基部はサイズ毎にカラーコード）
・12G=白、13G=オレンジ、14G=黄色
- ⑤ 中針用スタイレット（基部は全サイズとも白色）
- ⑥ 穿刺ガイドスタイレット
- ⑦ ロックキャップ（2個）



本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。
注意事項等情報には、「禁忌・禁止」事項や使用方法、使用上の注意等重要な事項が記載されています。