

腹腔鏡下総胆管用ドレナージカテーテル

J-キット

医療機器製造承認番号：21500BZZ00195000



適用

腹腔鏡下総胆管切開術後のドレナージ
腹腔鏡下胆嚢摘出術における術中・術後胆管造影

特長

- Jキットで、腹腔鏡下総胆管切開術後のドレナージ、腹腔鏡下胆嚢摘出術における術中・術後胆管造影が可能です。
- 穿刺針先端部のアングル加工により胆嚢管の形状にあわせカテーテルの誘導ができます。また、アングルは2段階の選択ができます。
- カテーテルは、適度な硬さを有していますので、挿入が容易です。
- カテーテルは、4Frでより細かい胆嚢管にも挿入可能であり、0.032"ガイドワイヤー（ストレート）の挿入ができます。

【特定保険医療材料】


分野名：吸引留置カテーテル

分類名：②受動吸引型 ②胆嚢用 イ胆嚢管チューブ

償還価格：12,700円

(2022年4月1日現在)

- ・本製品をご使用になる前に、必ず製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容をご確認ください。
- ・左写真のカテーテル結合アダプターの接続位置は、通常接続する位置とは異なります。

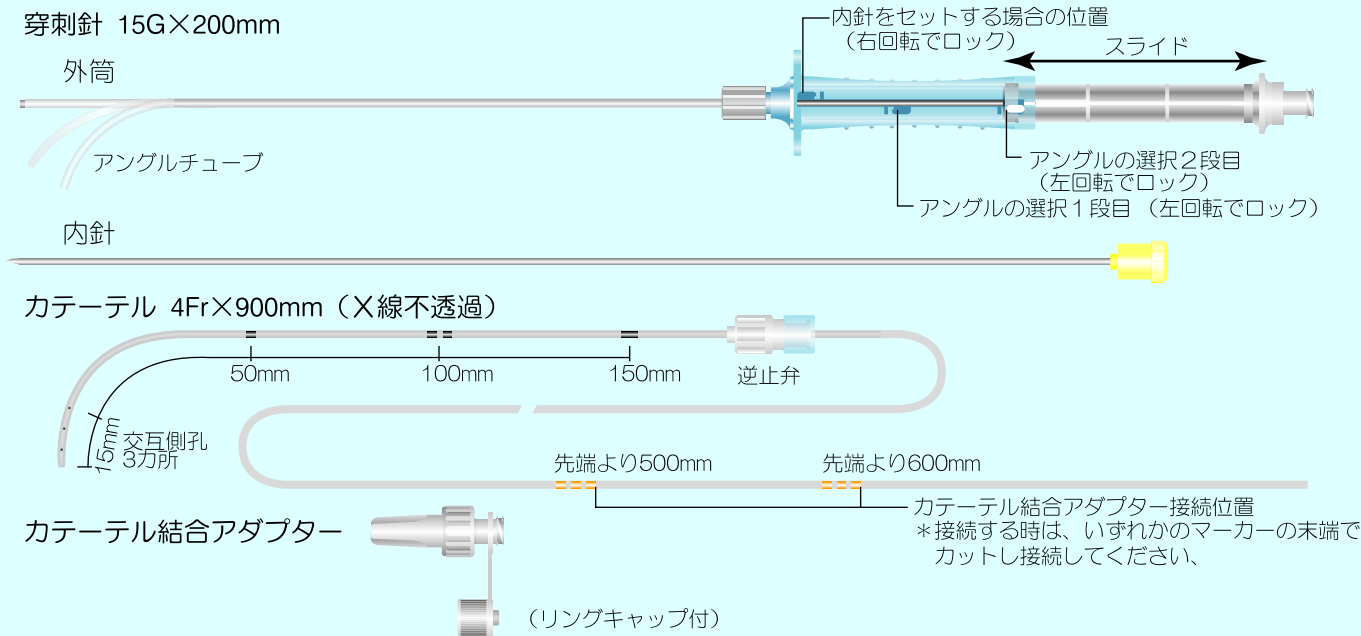

仕様

滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル 管理医療機器

製品名	製品コード	セット内容	包装形態
J-キット	29110900	穿刺針 15G×200mm カテーテル 4Fr×900mm (X線不透過) カテーテル結合アダプター	1箱1セット入り 1セット毎ピールオープン包装 EOG滅菌済