


NEW

LAPCOACHER PREMIUM

ラップコーチャー プレミアム


内視鏡下外科手術における縫合・結紮
などの鉗子操作のためのトレーナー

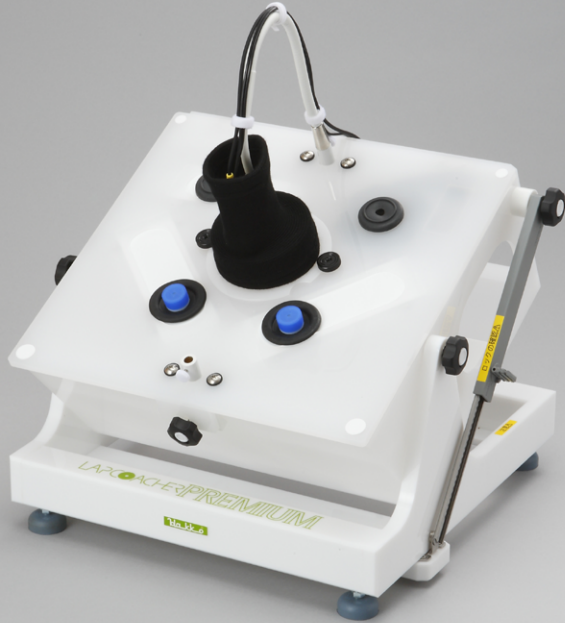


● お持ちのビデオ端子付テレビへ接続するだけで、縫合・結紮などの鉗子操作トレーニングが行えます。

● 目的に合わせ、さまざまなトレーニングが行えます。


- ①【内視鏡手術・単孔式内視鏡手術】のトレーニングを行うことができます。
- ②カメラ窓及びカメラステーのアングルを変えることで、さまざまな角度から見る事ができます。
- ③鉗子挿入弁の移動ができます。
- ④角度調節（ヘッドアップ・ヘッドダウン）を任意の角度で固定することができます。
- ⑤ターゲットの移動ができます。

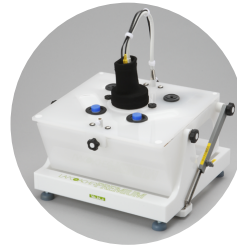


内視鏡手術（通常）

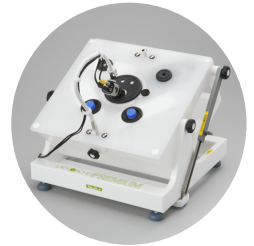

単孔式内視鏡手術

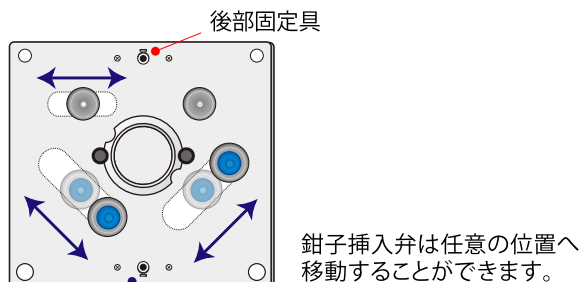


【角度調節】

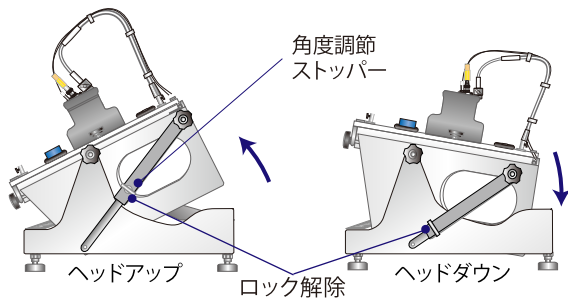


【内視鏡手術】

内視鏡手術用は
後部固定具
へ装着

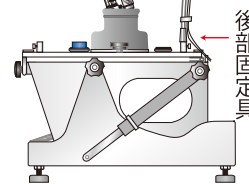


【単孔式内視鏡手術】

前部固定具
へ装着

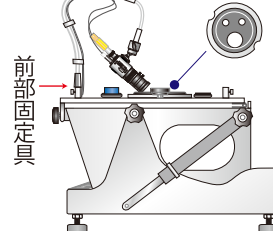

後部固定具
へ装着

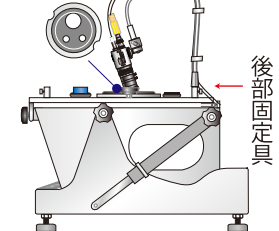

※角度調節後は、角度調節ストッパーがロックされていることを必ず確認してください。

仕 様

製品コード	本体寸法	本体重量	付属品
38014010	幅400x奥行376x高さ約240mm (高さ調節ネジにより高さ変動します)	約9.0kg	・C C Dカメラ付 ・窓カバー ・マジックテープ x 3 ・コルクプレート（目標物固定台）2枚 (1枚は本体設置済)

製品コード:38014150

製品名:ラップコーチャーPREMIUM 部品:ターゲット 1袋10枚入り (本体とは別売りになります)