


ミストレス バンズ

Mist-less VANSリトラクタセット AKR

MIST-LESS VANS RETRACTOR SET AKR

届出番号：20B1X00005000042 一般医療機器 開創器

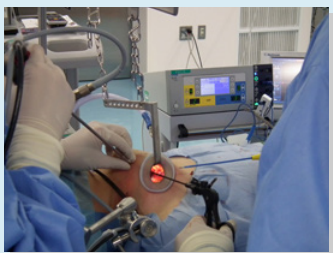

写真提供
旭川医科大学
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座 臨床指導教授
札幌徳洲会病院 耳鼻咽喉科
部長 片山 昭公先生

用途

- 甲状腺良性腫瘍、バセドウ病、副甲状腺腫過形成等の甲状腺手術

特長

- 吸引管があるため、術野をエナジーデバイスによるミストで遮らない良好視野での手術が可能です。
- 頸部吊り上げ法によるVANS法に甲状腺用ラッププロテクター®【FF0706S】と併用して使用します。（皮切2.5cm～3.5cm）。頸部に手術創がないため、術後の引きつれ等の症状が軽減され、整容性向上に期待できます。

*VANS法：Video-Assisted Neck Surgery

Mist-less VANSリトラクタセット AKR

①VANSリトラクタ

②スコープガイド

サイズ：φ5.8 x φ7.0 x 37mm
適応スコープ外径：φ5.5mm以下

③VANS用支柱セット

- ・支柱、スライドバー、チェーン（2本）
- ハンドル（3本）、スライダー（2本）

<本品はステンレス鋼（ニッケル・クロム含有）>


仕様

※本製品はリユース製品です。

製品コード	規格	包装形態
29130110	VANSリトラクタ	1 箱 1 台
29130130	スコープガイド	1 箱 1 個
29130120	VANS用支柱セット	1 箱 1 セット

- ・本製品は、部品毎での販売となります。
- ・未滅菌の状態での供給となりますので、ご使用前に注意事項等情報（電子添文等）に記載の方法にて必ず洗浄・滅菌を行ってください。
- ・金属アレルギーがある患者様への使用はご注意ください。（金属アレルギーが生じる可能性があります。）

①VANSリトラクタ

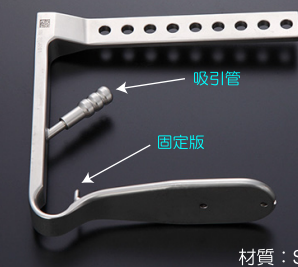


材質：SUS

②スコープガイド



材質：SUS

③VANS用支柱セット

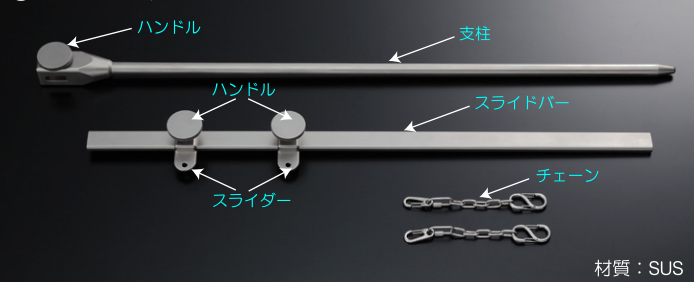

材質：SUS

◆併用医療機器◆


ラッププロテクター®

LAP PROTECTOR® sタイプ

認証番号：21900BZX00940000 単回使用開創器 管理医療機器

仕様

製品コード	製品名	型式	タイプ
29150300	ラッププロテクター	FF0706S	Sタイプ（甲状腺用）
包装形態			
1箱2個入、1個毎ピールオープン包装、EOG滅菌済			

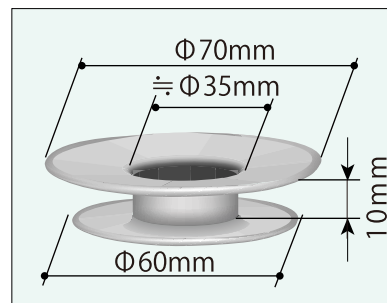

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル ☎(03)5804-8500
ホームページ <https://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 ☎(011)215-1530 横浜 ☎(045)954-2111 名古屋 ☎(052)914-8500 福岡 ☎(092)411-4100
仙台 ☎(022)257-8502 長野 ☎(026)276-3083 大阪 ☎(06)6453-9102 熊本 ☎(096)288-4690
柏 ☎(04)7131-8580 金沢 ☎(076)225-8560 岡山 ☎(086)243-3985 本郷商品管理センター
本郷 ☎(03)5804-8500 静岡 ☎(054)282-4185 松山 ☎(089)935-8517 ☎(03)5840-8502

株式会社 八光
メディカル事業部

hakko®

〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地