

製造販売届出番号：20B1X00005000032
 一般的名称：起子（一般医療機器）
 （剥離子（一般医療機器））

ロータリーダイセクター

適応


臓器圧排および剥離操作に使用

特長



- 表面が粗い角付きのチップにより、圧排時に臓器を確実にホールドできます。
- チップの形状は特殊な六角形のため、シャフトを回転させるだけで鈍的剥離が可能です。
- チップには吸水性があるため、血液等で濡れても滑りにくく、また、素材はポリエチレンのため、吸水しても安定した形状が保てます。
- チップ近位端より10mm間隔のメモリ付です。



φ12mm

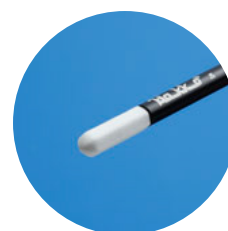

φ5mm

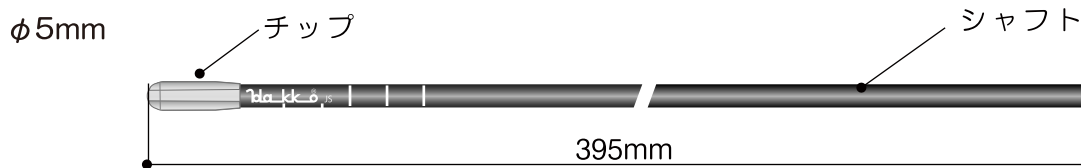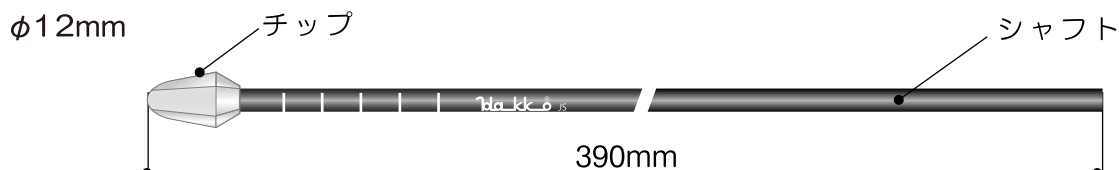

材質
 チップ…ポリエチレン
 シャフト…アルミニウム合金

仕様

製品コード	規格	適用トロッカー	包装形態*
29111520	φ12mm-Sタイプ（先端六角形）	φ12mm以上	1箱5セット入(1セット2本入)、EOG滅菌済
29111530	φ5mm-Sタイプ（先端六角形）	φ5mm以上	1箱5本入、EOG滅菌済

* φ12mm、φ5mmの箱入れ形態は異なります。

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。