

ディスポーザブル

硬脊麻針H型

HAKKO DISPOSABLE COMBINED EPIDURAL AND SPINAL BLOCK NEEDLE TYPE-H 医療機器承認番号:16100BZZ00413000

ISO80369-6

(誤接続防止の新規格コネクタ)



適応

脊髄くも膜下麻酔、硬膜外麻酔の併用

特長

- 硬脊麻針H型は、脊髄くも膜下麻酔と硬膜外麻酔を併用するための針です。脊髄くも膜下麻酔で十分な筋弛緩効果と硬膜外麻酔単独より早いonset timeの麻酔効果が得られます。
- 脊髄くも膜下麻酔の効果が十分でない場合においても、持続硬膜外麻酔カテーテルから追加注入すれば、確実な鎮痛効果が得られます。手術時間が延長しても、持続硬膜外麻酔カテーテルから注入すれば、十分な麻酔効果が得られます。
- 脊髄くも膜下麻酔が十分効果的であれば、持続硬膜外麻酔カテーテルからの追加局所麻酔薬量は、初回通常量より少なくなります。

hako[®]


脊髄くも膜下・硬膜外針 高度管理医療機器

心のかよう医療器ハッコー

本製品は、一回限りで再度のご使用は行わないでください。
製品の仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。


ディスポーザブル 硬脊麻針H型

脊髄くも膜下麻酔や硬膜外麻酔は、単独あるいは全身麻酔との併用で広く用いられています。しかし、脊髄くも膜下麻酔単独では持続時間が短い・硬膜外麻酔単独では効果が不十分、という場合があります。本製品「硬脊麻針H型」は、持続時間・効果どちらも満足できる方法として、脊髄くも膜下麻酔と硬膜外麻酔を同時に行うことができる製品です。

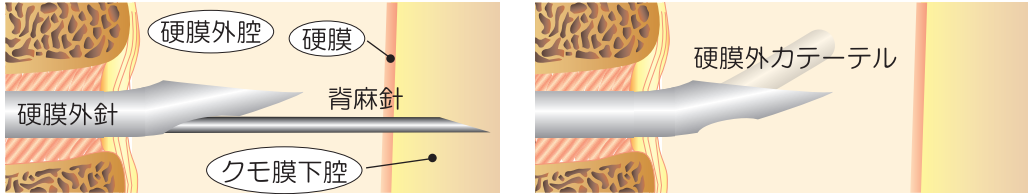


構造図

○硬膜外針

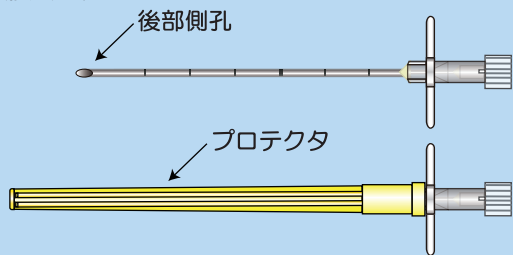

○脊麻針

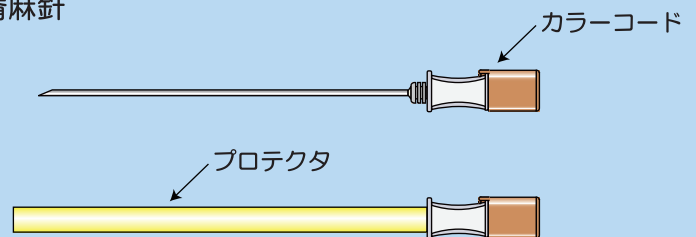

弊社製品の「ISO80369-6」の識別は、“プロテクタ黄色”です。

仕様

「*」は準規格品です。

製品コード	型式	サイズ	包装形態
27450016	HN17	硬膜外針：17G×80mm 脊麻針：26G L7 (先端：ヒューバーポイント 後部側孔付) (プラスチック基)	1箱10セット入り 1セット毎ピールオープン包装 EOG滅菌済
27450026*	HN17-FD7	硬膜外針：17G×80mm 脊麻針：24G-26G L7 (先端：ヒューバーポイント 後部側孔付) (プラスチック基)	
27450036	HN17-FD10	硬膜外針：17G×80mm 脊麻針：24G-26G L10 (先端：ヒューバーポイント 後部側孔付) (プラスチック基)	

本製品はISO80369-6対応製品ですので、従来のシリンジを接続することは出来ません。

関連製品

八光硬膜外麻酔用コンプリートセット

医療機器承認番号：20700BZZ00895A02
脊髄くも膜下・硬膜外麻酔キット 高度管理医療機器



八光脊椎麻酔用コンプリートセット

医療機器承認番号：20700BZZ00895A01
脊髄くも膜下・硬膜外麻酔キット 高度管理医療機器



どちらもご希望に合わせてセット内容を選択できます

販売窓口
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル ☎(03)5804-8500
ホームページ <https://www.hakko-medical.co.jp/>
札幌 ☎(011)215-1530 横浜 ☎(045)954-2111 名古屋 ☎(052)914-8500 福岡 ☎(092)411-4100
仙台 ☎(022)257-8502 長野 ☎(026)276-3083 大阪 ☎(06)6453-9102 熊本 ☎(096)379-5806
柏 ☎(04)7131-8580 金沢 ☎(076)225-8560 岡山 ☎(086)243-3985 本郷商品管理センター
本郷 ☎(03)5804-8500 静岡 ☎(054)282-4185 松山 ☎(089)935-8517 ☎(03)5840-8502

製造販売
株式会社 八光
メディカル事業部
〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地

hakkko®