

デスポーザブル

スパイナル針 P型 FD ミニキット

HAKKO DISPOSABLE SPINAL NEEDLE TYPE P-FD MINI-KIT

ISO80369-6（誤接続防止の新規格コネクタ）

本製品はISO80369-6対応製品ですので、従来の
シリンジを接続することは出来ません。

用途

脊髄くも膜下麻酔


特長

- 【スパイナル針P型FD、シリンジ、採液針】が1つのキットになった仕様です。
- 先端部を減径加工したスパイナル針です。穿刺の際の硬膜損傷を極力抑える事ができます。
- 穿刺はスムーズでかつ適度な刺通抵抗がありますので、指先の感覚で挿入位置の確認が容易に行えます。
- 針の先端部が細いので頭痛発生率が少なく、また、針の基部は透明ですので、髄液の逆流を素早く視認することができます。
- ガイド針を用いず素早く麻酔が行えます。

・弊社製品の「ISO80369-6」の識別は、“プロテクタ黄色”です。


セット内容

- ・スパイナル針P型FD
- ・採液針
- ・シリンジ5mL

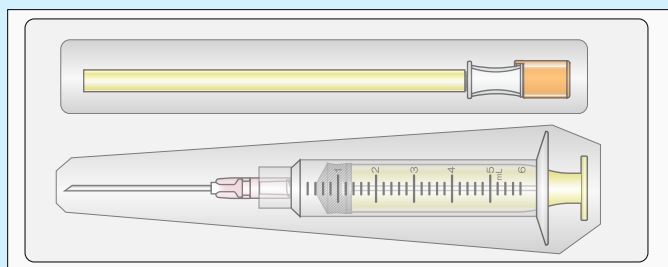


・弊社製品の「ISO80369-6」の識別は、“プロテクタ黄色”です。

◆スパイナル針P型FD

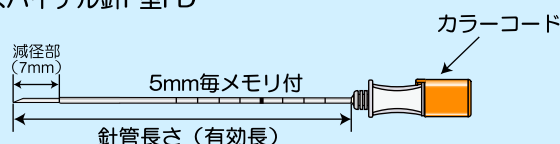

◆採液針 / シリンジ (5mL)

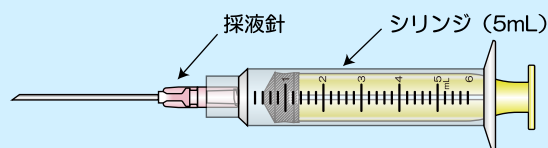

仕 様

「*」は準規格品です。

製品コード	(JANコード)	カラーコード	型 式	減径部
27070016	(4526737275000)	オレンジ	23G-25GX70mm 5mm毎メモリ	先端：7mm
27070036*	(4526737275024)		23G-25GX90mm //	
27070026	(4526737275017)	ベージュ	24G-26GX70mm //	

包装形態

1箱20セット入り、1セット毎ブリスター包装、E O G滅菌済

医療機器承認番号：16200BZZ00191000

麻酔脊髄用針

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。