

ディスポーザブル

スパイナル針 P型 ミニキット

HAKKO DISPOSABLE SPINAL NEEDLE TYPE-P MINI-KIT

ISO80369-6（誤接続防止の新規格コネクタ）

本製品はISO80369-6対応製品ですので、従来の
シリンジを接続することは出来ません。

用途

脊髄くも膜下麻酔


特長

- 【スパイナル針P型、シリンジ、採液針】が1つのキットになった仕様です。
- 穿刺はスムーズでかつ適度な刺通抵抗がありますので、指先の感覚で挿入位置の確認が容易に行えます。
- 外針刃面とスタイレット先端部が一致しています。また、スタイレット基の凸形状により刃面方向の確認ができます。
- スタイレット基は、ゲージ毎にカラーコード化されています。針基部は透明ですので、髄液の逆流を素早く視認することができます。

・弊社製品の「ISO80369-6」の識別は、“プロテクタ黄色”です。


セット内容

- ・スパイナル針P型
- ・採液針
- ・シリンジ5mL

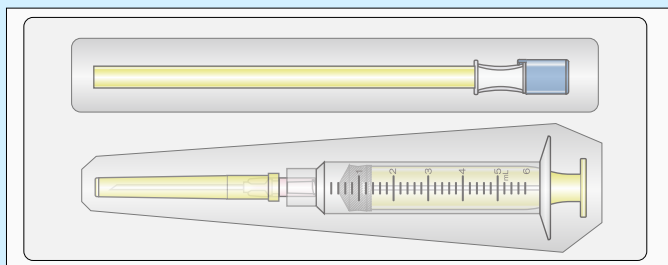


・弊社製品の「ISO80369-6」の識別は、“プロテクタ黄色”です。

○スパイナル針P型

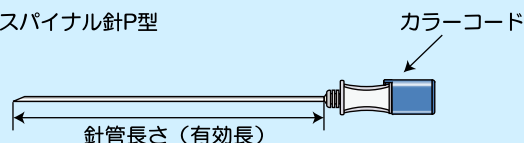

○採液針 / シリンジ (5mL)

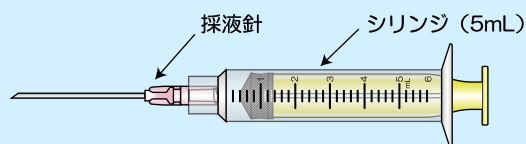

仕様

サイズ	カラーコード	針管長さ（有効長）別製品コード/JANコード	
		70mm	90mm
21 G	グリーン	270721 76 / 4526737275093	270721 96 / 4526737275109
22 G	ブラック	270722 76 / 4526737275116	270722 96 / 4526737275123
23 G	ライトブルー	270723 76 / 4526737275130	270723 96 / 4526737275147
25 G	オレンジ	270725 76 / 4526737275178	270725 96 / 4526737275185

包装形態

1箱20セット入、1セット毎プリスター包装 EOG滅菌済

医療機器承認番号：16200BZZ00191000

麻酔脊髄用針

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。