

2019年10月吉日

お客様各位

株式会社 八 光
メディカル事業部

ディスプレイザブル硬膜外針『IS080369-6 対応製品』のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃より八光製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび下記対象製品につきまして、誤接続防止コネクタ（以下 IS080369-6）をご案内申し上げます。

今後とも格別のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

—記—

1. 対象製品

ディスプレイザブル硬膜外針を含む単品およびセット

『ディスプレイザブル硬膜外針』、『硬膜外麻酔セット』、『八光硬膜外麻酔用コンプリートセット』、


『硬脊麻針H型』、『ペインクリニックセット』 各種

※詳細は別紙を参照ください。

2. カテーテル先端が刃先と面一の際の現規格と新規格の針基比較（例：ディスプレイザブル硬膜外針 17G×80mm）



カテーテルガイドを使用しない場合

- ・新規格の仕様上、硬膜外針の針基は現規格よりも5mm長くなっています。（①）
- ・新規格の針基にあるラインまでの長さが、現規格の針基端部までの長さと同じになっています。（②）
- ・カテーテル先端が硬膜外針刃先と面一の際に、現規格（③）では針基の端部と一致していたカテーテルの目盛（例では100mm）は、新規格（③'）では針基の内部（ラインの位置）になります。

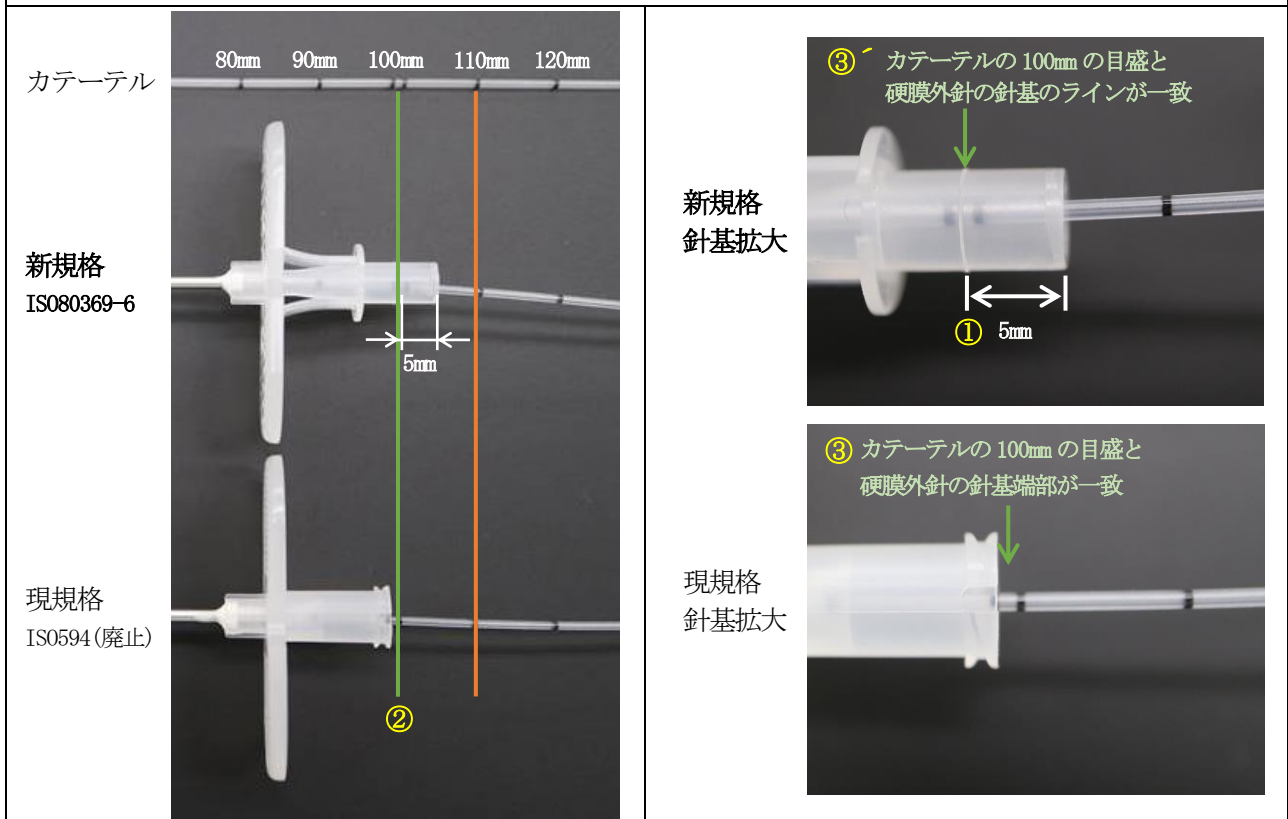

カテーテルガイドを使用する場合

- ・新規格のカテーテルガイドにはカテーテルの目盛を確認できる窓があります。 (①)
- ・カテーテル先端が硬膜外針刃先と面一の際に、現規格 (②) ではカテーテルガイドの端部と一致していたカテーテルの目盛 (例では 110mm) が、新規格 (①) では確認窓の位置にきます。

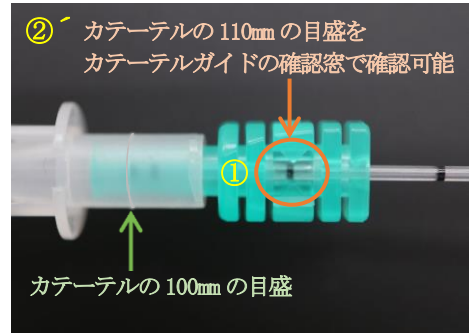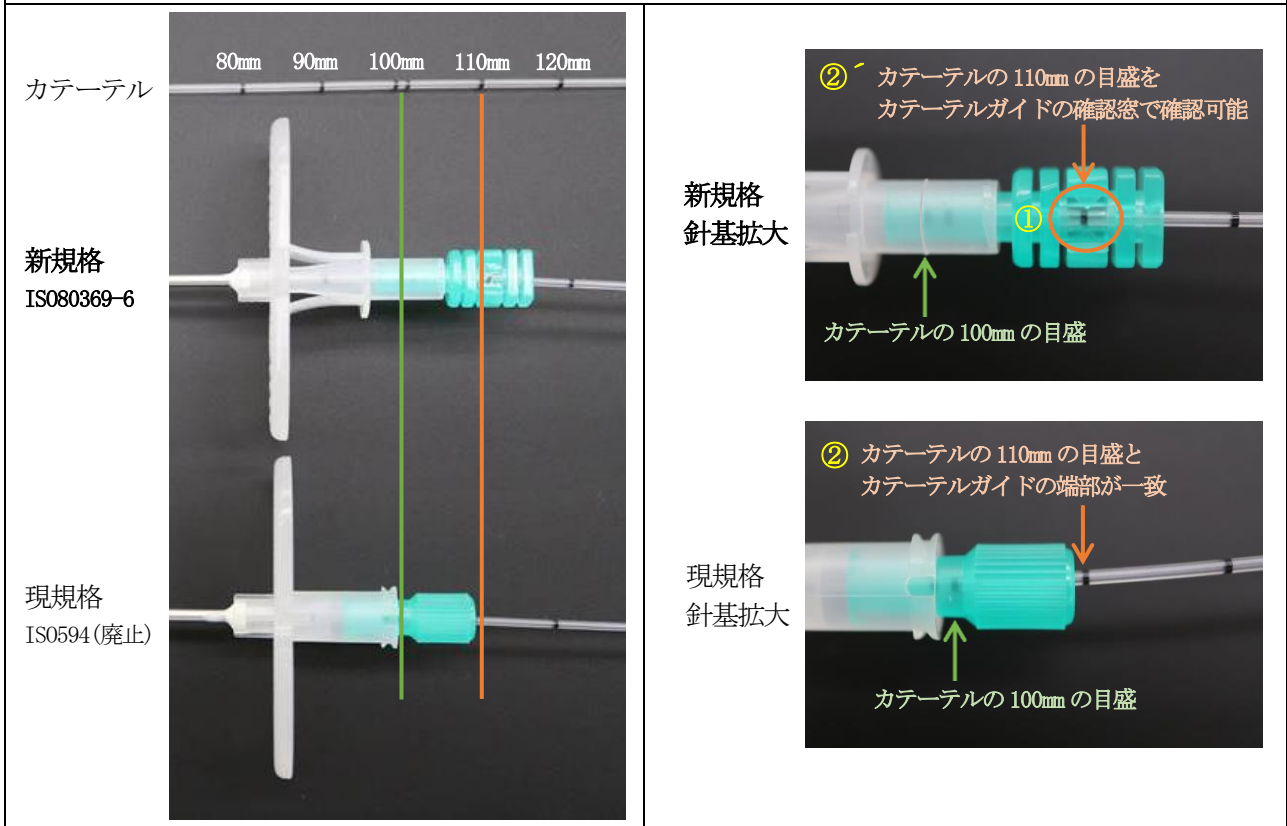

※ご不明な点がございましたら、最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。

以上

対象製品一覧

『ディスプレイダブル硬膜外針』

規格	現規格		新規格 (ISO80369-6)		入数
	製品コード	JAN コード	製品コード	JAN コード	
16Gx80mm (曲)	27231610	4526737271637	27231616	4526737276496	25
16Gx120mm (曲)	27231630	4526737272900	27231636	4526737276502	10
17Gx80mm (曲)	27231710	4526737271644	27231716	4526737276519	25
D 17Gx80mm (曲) DULL タイプ	27231780	4526737271705	27231786	4526737276557	25
17Gx100mm (曲)	27231720	4526737271651	27231726	4526737276526	10
17Gx120mm (曲)	27231730	4526737271668	27231736	4526737276533	10
18Gx80mm (曲)	27231810	4526737271712	27231816	4526737276564	25
19Gx80mm (曲)	27231910	4526737271743	27231916	4526737276601	25
20Gx60mm (曲) 10mm 目盛付	27232070	4526737273754	27232076	4526737276656	25
20Gx80mm (曲)	27232010	4526737271774	27232016	4526737276632	25
D 20Gx80mm (曲) DULL タイプ	27232090	4526737274317	27232096	4526737276670	25
22Gx60mm (曲)	27232220	4526737271828	27232226	4526737276694	25
22Gx80mm (曲)	27232210	4526737271811	27232216	4526737276687	25
16Gx80mm (直)	27251610	4526737271859	27251616	4526737276724	25
17Gx80mm (直)	27251710	4526737271866	27251716	4526737276731	25
18Gx80mm (直)	27251810	4526737271873	27251816	4526737276748	25
19Gx80mm (直)	27251910	4526737271897	27251916	4526737276755	25
20Gx80mm (直)	27252010	4526737271910	27252016	4526737276762	25
22Gx60mm (直)	27252220	4526737271958	27252226	4526737276786	25
22Gx80mm (直)	27252210	4526737271941	27252216	4526737276779	25

『硬膜外麻酔セット』

規格	現規格		新規格 (ISO80369-6)		入数
	製品コード	JAN コード	製品コード	JAN コード	
EF17I-95	27413010	4526737272245	27413016	4526737277073	10
EF17I-130	27413040	4526737272269	27413046	4526737277097	10
EF18I-95	27413050	4526737272276	27413056	4526737277103	10
E17I-95	27413510	4526737272290	27413516	4526737277158	10
E17I-95-S5	27413650	4526737274492	27413656	4526737277219	10
E17I-95-S6	27413530	4526737273808	27413536	4526737277165	10
E18I-95	27413550	4526737272320	27413556	4526737277172	10
E1805I-80-SS	27413600	4526737273334	27413606	4526737277196	10
E19I-0E70	27413560	4526737272337	27413566	4526737277189	10
EF17TR-0E95	27413020	4526737272252	27413026	4526737277080	10
EF17H-95	27414010	4526737272344	27414016	4526737277226	10
EF18H-95	27414030	4526737272368	27414036	4526737277240	10
E17H-95	27414020	4526737272351	27414026	4526737277233	10
E18H-95	27414040	4526737272375	27414046	4526737277257	10
EF17HR-95	27414050	4526737272382	27414056	4526737277264	10

EF18HR-95	27414070	4526737272405	27414076	4526737277288	10
E17HR-95	27414060	4526737272399	27414066	4526737277271	10
E18HR-95	27414080	4526737272412	27414086	4526737277295	10

『硬脊麻針H型』

規格	現規格		新規格 (ISO80369-6)		入数
	製品コード	JANコード	製品コード	JANコード	
HN17	27450010	4526737272504	27450016	4526737277431	10
HN17-FD7	27450020	4526737272511	27450026	4526737277448	10
HN17-FD10	27450030	4526737272528	27450036	4526737277455	10

『ペインクリニックセット』

規格	現規格		新規格 (ISO80369-6)		入数
	製品コード	JANコード	製品コード	JANコード	
50mm タイプ GF17HR95-03h50	27430500	4526737274669	27430506	4526737277370	10
100mm タイプ GF17HR95-05h100	27430510	4526737274676	27430516	4526737277387	10
150mm タイプ GF17HR95-08h150	27430520	4526737274683	27430526	4526737277394	10
200mm タイプ GF17HR95-10h200	27430530	4526737274690	27430536	4526737277400	10
HS タイプ GF17I95P5-03h40	27430540	4526737274706	27430546	4526737277417	10
HS タイプ GF18I95P5-03h40	27430550	4526737274744	27430556	4526737277424	10

※ 『八光硬膜外麻酔用コンプリートセット』につきましては別途ご連絡させていただきます。

※ 本表に記載のない規格につきましては、最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。