

# ハ光脊椎麻醉用 コンプリートセット

HAKKO DISPOSABLE SPINAL ANESTHESIA SET 医療機器承認番号：20700BZZ00895A01

**ISO80369-6**

(誤接続防止の新規格コネクタ)

従来のコネクタ  
(ISO594※)



※ISO594は廃止されています。

## 特長

- ハ光脊椎麻醉用コンプリートセットは、ご希望に合わせてセット内容を選択していただくことができます。本カタログの部品リストをご参照いただき、セット内容をご指定ください。
- スパイナル針や消毒用アイテムなどをセットにすることで、脊椎麻醉の準備が効率的に行えます。
- プロテクタースタンドやスポンジブロックの採用により、使い易く、安全なセットをご提供させていただきます。

本セットはカスタムメイドにて製作いたします。裏面の部品リストよりセット内容をご指定ください。

**hakko®**

脊髄くも膜下・硬膜外麻醉キット 高度管理医療機器

心のかよう医療器ハッコー

本製品は、一回限りで再度のご使用は行わないでください。  
製品の仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

八光脊椎麻酔用コンプリートセット構成部品

●部品リスト（この部品リストよりセット内容をご指定ください。）      は ISO80369-6、      は従来のコネクタです。

| 分 類          | 品 名                              | 規格・サイズ           | 分 類                                                                                                                           | 品 名          | 規格・サイズ         |
|--------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 背麻針          | スパイナル針 P型                        | 21G×70mm         | 生食カップ                                                                                                                         | 生食カップ        | 50mL（ブルー）      |
|              | スパイナル針 P型                        | 23G×70mm         |                                                                                                                               | 生食カップ        | 60mL           |
|              | スパイナル針 P型FD                      | 23-25G×70mm      |                                                                                                                               | 生食カップ        | 95mL           |
|              | スパイナル針 P型FD                      | 25-27G×70mm      | シリンジ                                                                                                                          | ガラスシリンジ      | 2mL（スリップ）      |
|              | *スパイナル針P型およびP型FDのカタログと併せてご覧ください。 |                  |                                                                                                                               | ガラスシリンジ      | 5mL（スリップ）      |
| トレイ          | シングルトレイ（麻酔用・中）                   |                  |                                                                                                                               | ガラスシリンジ      | 10mL（スリップ）     |
|              | 麻酔用トレイ                           |                  |                                                                                                                               | プラスチックシリンジ   | 5mL（ロック）       |
|              | 消毒用トレイ                           |                  |                                                                                                                               | プラスチックシリンジ   | 10mL（ロック）      |
| オイフ<br>（代表例） | 穴付オイフ（撥水性、テープなし）                 | 60×60cm Φ9cm穴    |                                                                                                                               | プラスチックシリンジ   | 5mL（スリップ）      |
|              | 穴付オイフ（撥水性、テープ付）                  | 90×90cm Φ9×15cm穴 |                                                                                                                               | プラスチックシリンジ   | 10mL（スリップ）     |
|              | 穴付オイフ（吸水防水性、テープ付）                | 90×90cm Φ9cm穴    | 鉗子類                                                                                                                           | 綿球把持用鉗子      | 18.5cm ポイントチップ |
|              | 穴付オイフ（吸水防水性、テープ付）                | 90×90cm Φ15cm穴   |                                                                                                                               | ピンセット        | 12cm ポイントチップ   |
| 消毒用          | OWガーゼ                            | 20×20cm 4折       | シート                                                                                                                           | クリンリーフ       | 38×30cm        |
|              | OWガーゼ                            | 15×15cm 4折       |                                                                                                                               | シート（撥水性）     | 90×90cm        |
|              | アメディーゼ                           | 30×30cm 4折       |                                                                                                                               | シート（吸水防水）    | 90×90cm        |
|              | スポンジスティック                        |                  | 薬液プラント針                                                                                                                       | 採液針          | 18G            |
|              | 綿球                               | Φ2.5cm           |                                                                                                                               | 薬液調整用針       |                |
|              | 綿球                               | Φ3cm             | <span style="background-color: yellow;">    </span> ISO80369-6 <span style="background-color: lightblue;">    </span> 従来のコネクタ |              | 23G            |
| ラッパー         | 綿球                               | Φ4cm             | <span style="background-color: lightblue;">    </span> 一般針                                                                    |              | 25G            |
|              | ラッパー（撥水性）                        | 60×60cm          | その他部品                                                                                                                         | 針用スポンジブロック*1 |                |
|              | ラッパー（撥水性）                        | 90×90cm          |                                                                                                                               | プロテクタースタンド*2 |                |
|              | ラッパー（吸水防水）                       | 90×90cm          |                                                                                                                               |              |                |

包装形態


1箱5セット入、1セット毎ピールオープン包装、EOG滅菌済      ・包装内のトレイはラッパーでラッピングされています。

お願い） 部品リスト以外のご要望につきましては、最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。

従来のコネクタとISO80369-6コネクタの製品は、相互に接続することが出来ません。


※最低発注数量は30セットです。また、箱入数はセット内容によって変更になることがあります。

●針刺事故防止アイテム

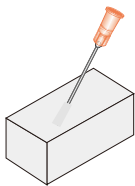

スポンジブロック使用例\*1

左図のように、手技中に使用済みになった一般針／麻酔針でスポンジブロックを穿孔してください。一時的に針先をカバーすることができます。  
手技終了後は所定の方法により処理をしてください。

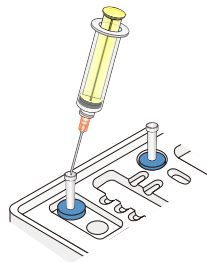

プロテクタースタンド使用例\*2

1. 一般針／麻酔針より取り外した針力バーをスタンドに挿入してください。
2. 針付のシリンジを軽く針力バーに挿入してください。
3. 術中に立てた状態にしておく事ができます。

関連製品

スパイナル針 P型

医療機器承認番号：16200BZZ00191000 麻酔背髄用針 高度管理医療機器



スパイナル針 P型FD

医療機器承認番号：16200BZZ00191000 麻酔背髄用針 高度管理医療機器

