

ディスポーザブル

神経ブロック針 PM-Echo

HAKKO DISPOSABLE NEUROTIC NERVE BLOCK NEEDLE

ISO80369-6 (誤接続防止の新規格コネクタ)


本製品はISO80369-6対応製品ですので、従来のシリンジを接続することは出来ません。

用途

神経ブロック

特長

- 針先 (10mm間) 超音波反射加工を施していますので、超音波画像下における視認性が向上しています。
- 針管部は適度な硬さで、穿刺時の曲がりや折れを防ぎ、安全な手技が行えます。
- 針管部には、10mm毎にメモリがありますので挿入距離の確認が容易です。
- 針基はプラスチック基で、カラーコードされています。

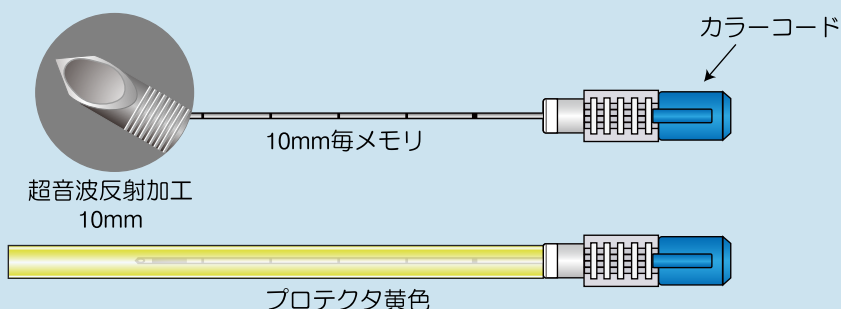

・本製品の「ISO80369-6」の目印は、「プロテクタ黄色」です。

仕様

製品コード	(JANコード)	サイズ (型式)	カラーコード	包装形態
27110206	(4526737275666)	2.2G×50mm PM-Echo	ブラック	1箱25本入 1本毎ピールオープン包装 EOG滅菌済
27110216	(4526737275673)	2.2G×70mm PM-Echo		
27110226	(4526737275680)	2.2G×100mm PM-Echo		
27110306	(4526737275697)	2.3G×50mm PM-Echo	ブルー	1箱25本入 1本毎ピールオープン包装 EOG滅菌済
27110316	(4526737275703)	2.3G×70mm PM-Echo		
27110326	(4526737275710)	2.3G×100mm PM-Echo		

- ・本製品をご使用になる前に、必ず製品に添付されています医療機器添付文書をお読み下さい。
- ・医療機器添付文書には、製品の使用方法、使用上の注意などの重要な情報が記載されています。