

KNベッセルダイセクター

製造販売届出番号：13B1X00245200001

一般医療機器 剥離子


NEW

適応

内視鏡下での甲状腺切除術における、深部での左右血管周囲の剥離操作を行うための甲状腺上極剥離用デバイス

特長

- 低侵襲かつ簡単に視野確保でき、安全に剥離操作を行えます。
- 先端部には貫通孔があるため、結紮糸等を通すこともできます。
- 右巻きタイプと左巻きタイプの2種類があります。
- 本製品は未滅菌品です。

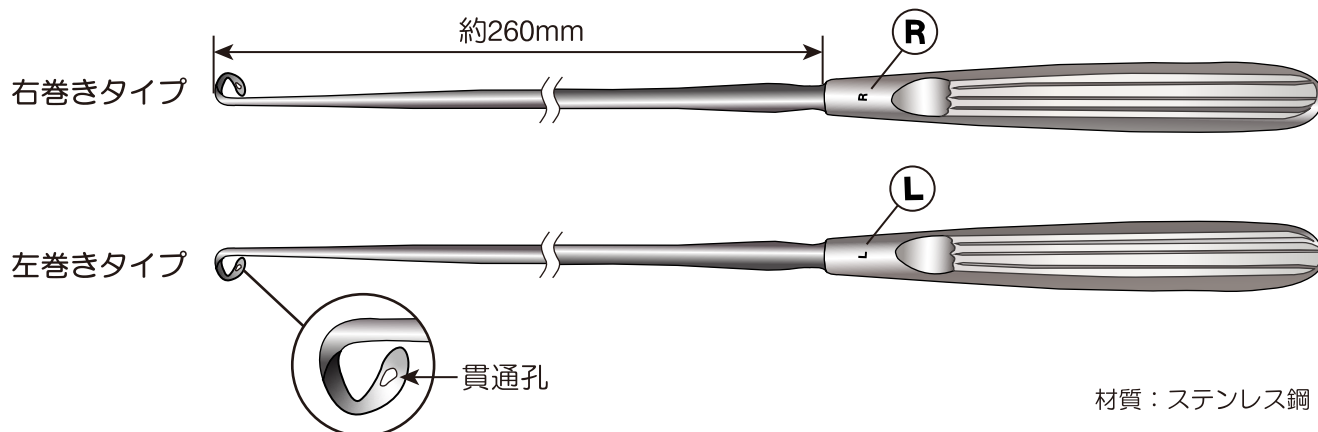

仕様

製品コード	規格	包装形態
39020010	右巻きタイプ (TKZ-F1212KN-1)	1箱1本入 未滅菌
39020020	左巻きタイプ (TKZ-F1212KN-2)	

※ 本製品は未滅菌品のため、使用前および再使用前には適切な方法で洗浄・高圧蒸気滅菌を行ってください。

滅菌方法代表例：高圧蒸気滅菌（日本薬局方／微生物殺滅法）

115～118℃ 30分、121～124℃ 15分、126～129℃ 10分

ご使用になる際には 製品に添付されている医療機器添付文書を必ずお読みください。