

イージーエアー

E・Zairリザーバー

製造販売届出番号：20B1X00005000051

一般医療機器

排気用チューブ

◀リザーバーバッグが
膨らんだ状態リザーバーバッグが
萎んだ状態▼

適応


腹腔での手術時に内圧を安定させるために使用

特長


- 術野（狭腔）と排煙装置の間にE・Zairリザーバーを接続し、一時的に気腹ガスを溜めておくことで、腔内の急激な内圧変化を軽減します。
- 内圧変化を軽減することにより、安定した視野と処置空間を確保することが可能です。
- リザーバーバッグはリザーバーカバーで保護されているため、誤って製品を押してしまっても術野側に気腹ガスが逆流することはありません。

写真提供
京都中部総合医療センター
消化器外科 副院長
山岡 延樹 先生

使用イメージ

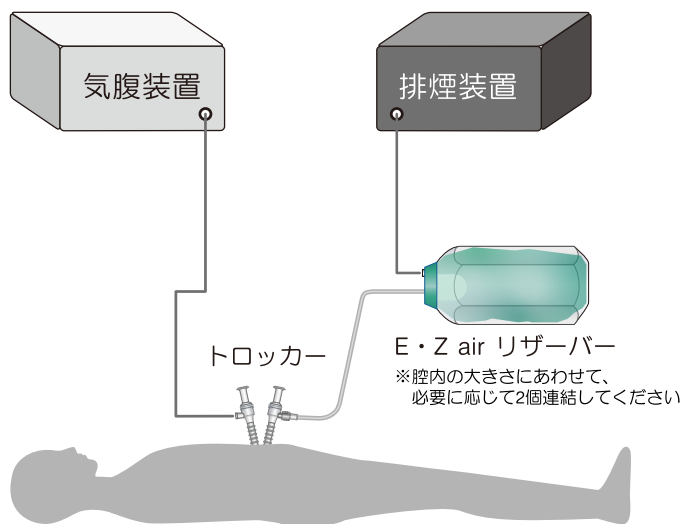

仕様

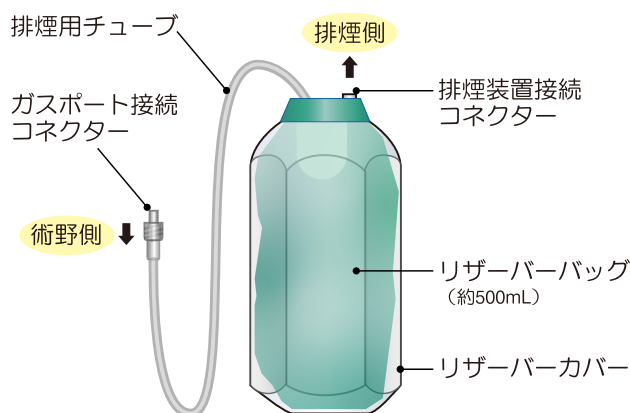

仕様

製品コード / JANコード	リザーバーバッグ容量	排煙用チューブサイズ
29112400 / 4526737292830	約500mL	3.2×4.4×500mm

包装形態

1箱5個入、1個毎ピロー包装 EOG滅菌済

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。