


タミス

TAMIS-NUポート

製造販売届出番号：20B1X00005000052

一般医療機器 自然開口向け単回使用内視鏡用拡張器

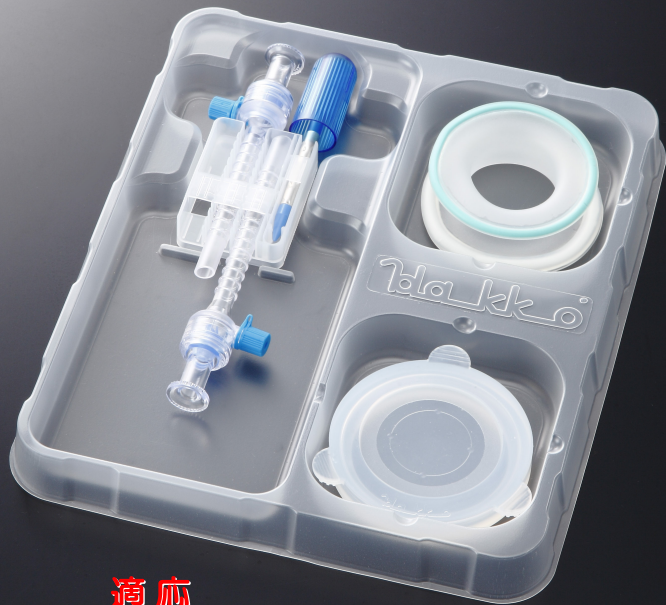

適応

経肛門の内視鏡下外科手術専用デバイス

特長

- プロテクターで肛門管を拡張させるため、比較的広い術野を確保できます。また、E・Zアクセスおよびポートを装着することで内視鏡下での直腸手術を可能にします。
- プロテクターは、破れにくい膜厚(1.0mm)かつ、柔らかく伸びやすいシリコンゴム製。上リングは緑色、下リングは白色のため、上下の識別が容易です。また、下リングは径が太く、肛門管からの脱落を防ぎます。
- E・Zアクセスは、任意の位置にポートを配置することができます。
- ポートの先端は、E・Zアクセスに挿入し易く、プロテクターを損傷しにくい形状になっています。
- ブレードシャフトは、E・Zアクセス穿孔用です。

構成品 <型式：T0707-SGLG>


使用方法はこちら▶





プロテクター
FF0707T 1個

E・Zアクセス
FF07用 1個

ポート
5-70mm 1本
5-86mm 1本

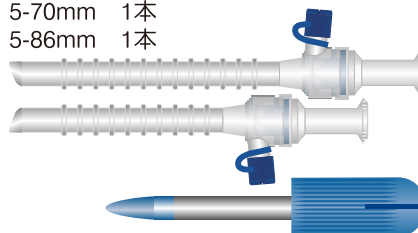

ブレードシャフト ※体表への穿刺にはご使用いただけません
Φ5.8×Φ5.3×41mm 1本

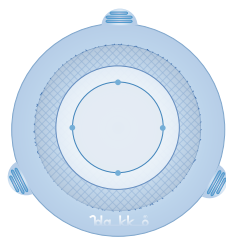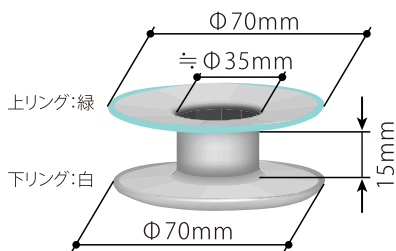

仕様

製品コード	型式	セット内容				包装形態
29153010	T0707-SGLG	プロテクター FF0707T 1個	E・Zアクセス FF07用 1個	ポート 5-70mm 1本 5-86mm 1本	ブレードシャフト 1本	1箱2セット入、 1セット毎ピールオープン包装、 EOG滅菌済

関連製品

E・Zairリザーバー

製造販売届出番号：20B1X00005000051
一般医療機器 排気用チューブ

適応

TAMIS等の狭腔での手術時に
内圧を安定させるために使用



製品コード：29112400
バッグ容量：約500mL
チューブサイズ：3.2×4.4×500mm
包装形態：1箱5個入
EOG滅菌済

ご使用になる際には 製品に添付されている医療機器添付文書を必ずお読みください。