

ラパヘルクロージャー SP

医療機器認証番号：21900BZX00941000

管理医療機器 単回使用ワイヤ・結さつ系パサ－



適応


腹腔鏡下小児鼠径ヘルニア手術（LPEC法）における縫合系の誘導 等

特長

- 刃先の引き込みが可能な外針と、鈍的先端を備える中針と、縫合系把持用のループで構成されています。
- 刃先を引き込むことで鈍的先端に切り替え可能。一連の操作で、周辺組織の損傷リスクを低減します。
- 2-0サイズの縫合系に対応。



操作方法はこちら▶

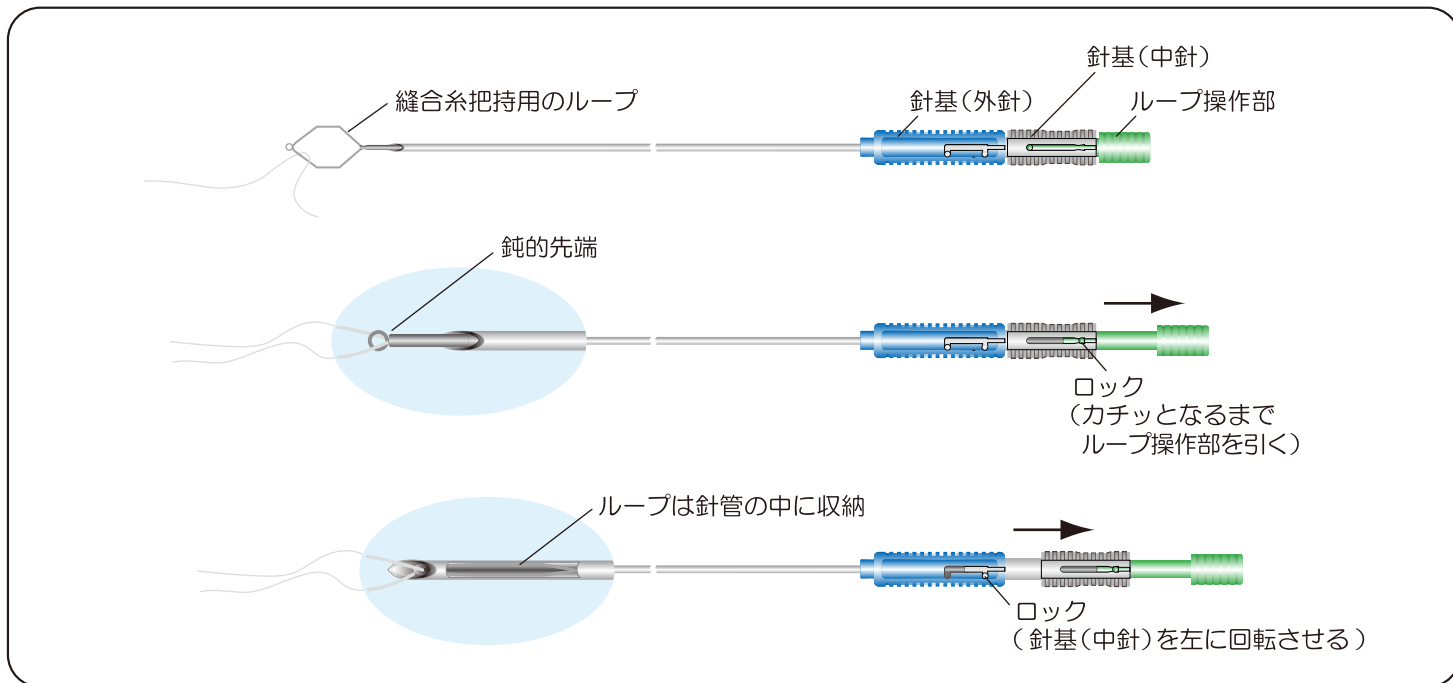

仕様

製品コード / JANコード	サイズ	把持用ループ線径
29112610 / 4526737292922	17G×130mm	約0.2mm
包装形態		
1箱5本入、1本毎ピールオープン包装 EOG滅菌済		

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。

販売窓口

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル TEL (03)5804-8500
ホームページ <https://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 (011)215-1530	横浜 (045)954-2111	名古屋 (052)914-8500	福岡 (092)411-4100
仙台 (022)257-8502	長野 (026)276-3083	大阪 (06)6453-9102	熊本 (096)288-4690
柏 (04)7131-8580	金沢 (076)225-8560	岡山 (086)243-3985	本郷商品管理センター
本郷 (03)5804-8500	静岡 (054)282-4185	松山 (089)935-8517	(03)5840-8502

製造販売

株式会社 八光
メディカル事業部



〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地