

麻酔用滅菌済み穿刺針

医療機器承認番号：16200BZZ01607A01

ソノレクトニードル

HAKKO DISPOSABLE MONOPOLAR NERVE BLOCKADE NEEDLE



適応

神経ブロック

特長


- ソノレクトニードルには以下の仕様があります。
 - 絶縁コーティング付
 - 針先端部 CCR加工タイプ (Type CCR)
 - CCR加工なしタイプ
 - 絶縁コーティングなし
 - 針先端部 CCR加工付 (USG Type CCR)
 - 針先端部 矩形溝加工付 (Tuohy USG Echo)
- 先端部の「CCR加工/矩形溝加工」を施した部分は、超音波映像下において描出性能が優れています。
- 針基はホールドしやすい形状。穿刺はスムーズでかつ適度な刺通抵抗があり、指先の感覚で挿入位置の確認が容易に行えます。
- 専用刺激装置「羅針Plex」と接続することで、電気刺激を行う事もできます。

ISO80369-6

(誤接続防止の新規格コネクタ)

【描出画像】


ソノレクトニードル (USG Type CCR φ0.8)

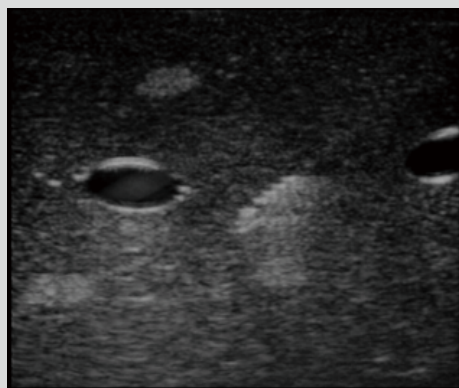

【被穿刺物】


Blue Phantom™
Select Series Peripheral Nerve Block

【超音波診断装置】

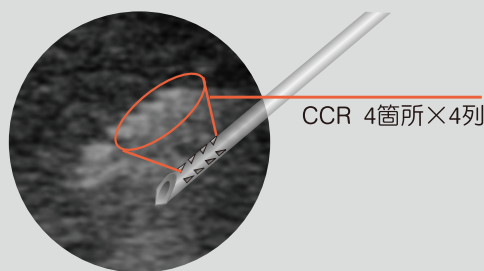
株式会社 ソノサイト・ジャパン
装置：Micro Maxx (マイクロマックス)
プローブ：HFL38/13-5MHz

CCRとは？

Corner Cube Reflectorの略称名。

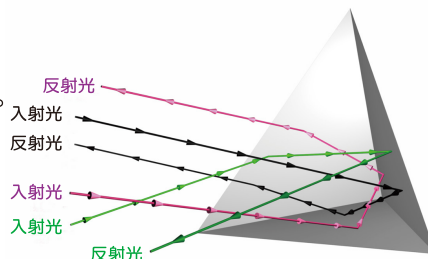入射光方向に対し反射光を平行に戻す性質。
反射光は入射角度に依存しません。


Type CCR

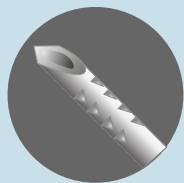


刃先角度: 25°
CCR加工: 円周上 4箇所×4列
※標準品はCCR加工がされておりません。




USG Type CCR

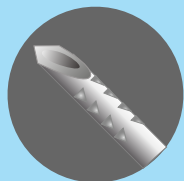


刃先角度: 20°
CCR加工: 円周上 4箇所×4列

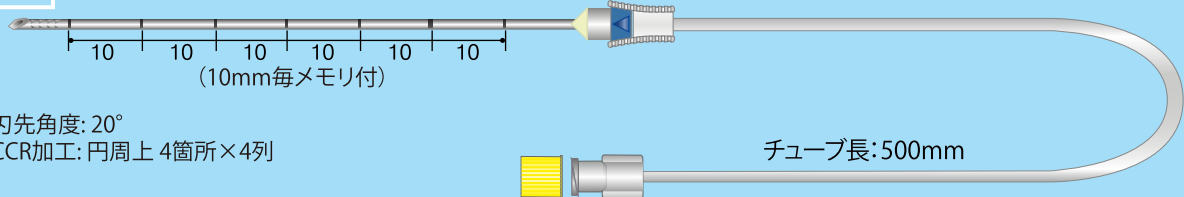

Tuohy USG Echo

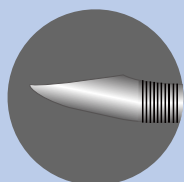

矩形溝加工
10mm

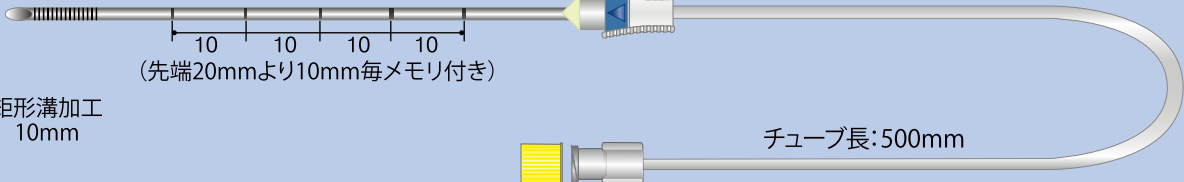

仕様

「*」は受注生産です。

製品コード	規格	刃先 角度	絶縁 加工	超音波 対応加工	メモリ	コード	延長 チューブ
27130136	φ0.8 (21G) × 50mm	25°	○	—	—	○	○
27130146	φ0.8 (21G) × 100mm	25°	○	—	—	○	○
27130166	φ0.7 (22G) × 50mm	25°	○	—	—	○	○
27130176	φ0.7 (22G) × 100mm	25°	○	—	—	○	○
27130186	φ0.55 (24G) × 25mm	25°	○	—	—	○	○
27131016	φ0.7 (22G) × 50mm	25°	○	☆※1	—	○	○
27131026	φ0.8 (21G) × 70mm	25°	○	☆	—	○	○
27131036	φ0.8 (21G) × 100mm	25°	○	☆	—	○	○
27131046	φ0.8 (21G) × 50mm	25°	○	☆	—	○	○
27131056 *	φ0.8 (21G) × 120mm	25°	○	☆	—	○	○
27131066 *	φ0.8 (21G) × 150mm	25°	○	☆	—	○	○
27132016	φ0.7 (22G) × 50mm	20°	—	☆	○	—	○
27132026	φ0.7 (22G) × 70mm	20°	—	☆	○	—	○
27132036	φ0.8 (21G) × 70mm	20°	—	☆	○	—	○
27132046	φ0.8 (21G) × 100mm	20°	—	☆	○	—	○
27132056 *	φ0.8 (21G) × 120mm	20°	—	☆	○	—	○
27132516	φ0.7 (22G) × 70mm	—	—	★※2	○	—	○
27132526	φ0.9 (20G) × 100mm	—	—	★	○	—	○

包装形態

1 箱 10 本入、1 本毎ピールオープン包装、EOG滅菌済

本製品はISO80369-6対応製品ですので、従来のシリンジを接続することは出来ません。

備考：27131016 φ0.7 (22G) × 50mm (Type CCR) のCCR加工は円周上3箇所×3列です。 超音波対応加工 ※1「☆」・・・CCR加工 ※2「★」・・・矩形溝加工

- ・本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。
- ・準規格品は受注生産のため、ご注文の前に在庫の確認をお願いいたします。