

エンドタニケット

医療機器認証番号：303ADBZX00040000

管理医療機器

結さつ用テープ

適応

内視鏡下外科手術における一時的な血管結紮

特長


- 肝切除等の際に、一時的に血流を遮断するプリングル法※に用いるタニケットです。
- シャフト、外筒、外科用テープのセットです。シャフトは外科用テープを外筒に引き込む際に使用します。
- 腹腔鏡下手術にて、5mmポートより挿入することができます。
- 外筒は適度な剛性があり、外科用テープの締め付けが適切に行えます。

※プリングル法：肝切除や肝外傷の手術に際して出血量を減少させるために、肝十二指腸腸靱帯を鉗子でクランプして肝動脈および門脈系の血流を一時的に遮断する方法。

（出典：日本救急医学会 医学用語解説集）

＜セット内容＞


シャフト

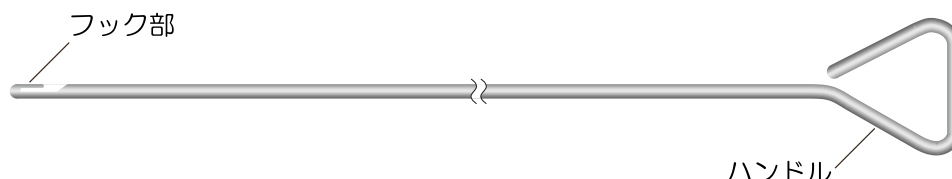


使用方法是こちら▶



外筒

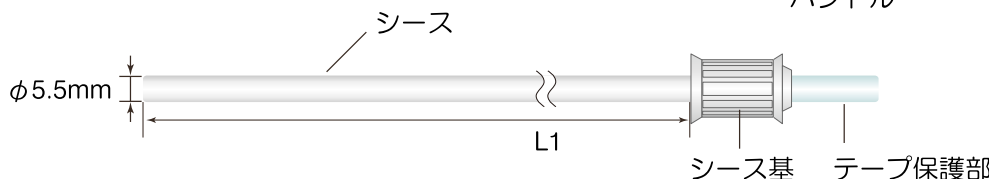

外科用テープ

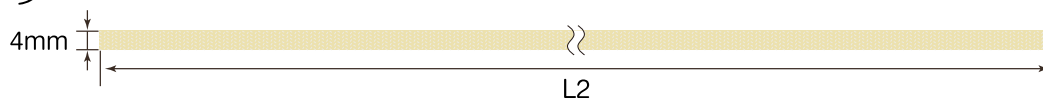

シャフト：ステンレス、外筒（シース）：フッ素樹脂、外筒（テープ保護部）：シリコーンゴム、外科用テープ：ポリエステル、ナイロン

仕様

製品コード / JANコード	サイズ	シース有効長（L1）	外科用テープ長さ（L2）
29112700 / 4526737292939	Φ5.5-350mm	350mm	1,200mm
29112710 / 4526737292991	Φ5.5-250mm	250mm	1,000mm

包装形態

1箱2セット入、1セット毎ピールオープン包装 EOG滅菌済

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。