

腹腔鏡下総胆管用ドレナージカテーテル

J-キット

医療機器承認番号：21500BZZ00195000

※カテーテル結合アダプターの
接続位置は、通常接続する位置
とは異なります。

適応

腹腔鏡下総胆管切開術後のドレナージ
腹腔鏡下胆嚢摘出術における術中・術後胆管造影

特長

- 腹腔鏡下総胆管切開術後のドレナージ、腹腔鏡下胆嚢摘出術における術中・術後胆管造影が可能です。
- 穿刺針先端部のアングル加工により胆嚢管の形状にあわせカテーテルの誘導ができます。また、アングルは2段階の選択ができます。
- カテーテルは、適度な硬さを有していますので、挿入が容易です。
- カテーテルは、4Frでより細い胆嚢管にも挿入可能であり、0.032"ガイドワイヤー（ストレート）の挿入ができます。

【特定保険医療材料】


分野名：029 吸引留置カテーテル

分類名：(2)受動吸引型 ②胆嚢用 イ胆嚢管チューブ

償還価格：12,700円

(2024年6月1日現在)

本製品をご使用になる前に、必ず製品の注意事項等
情報（電子添文等）の内容をご確認ください。

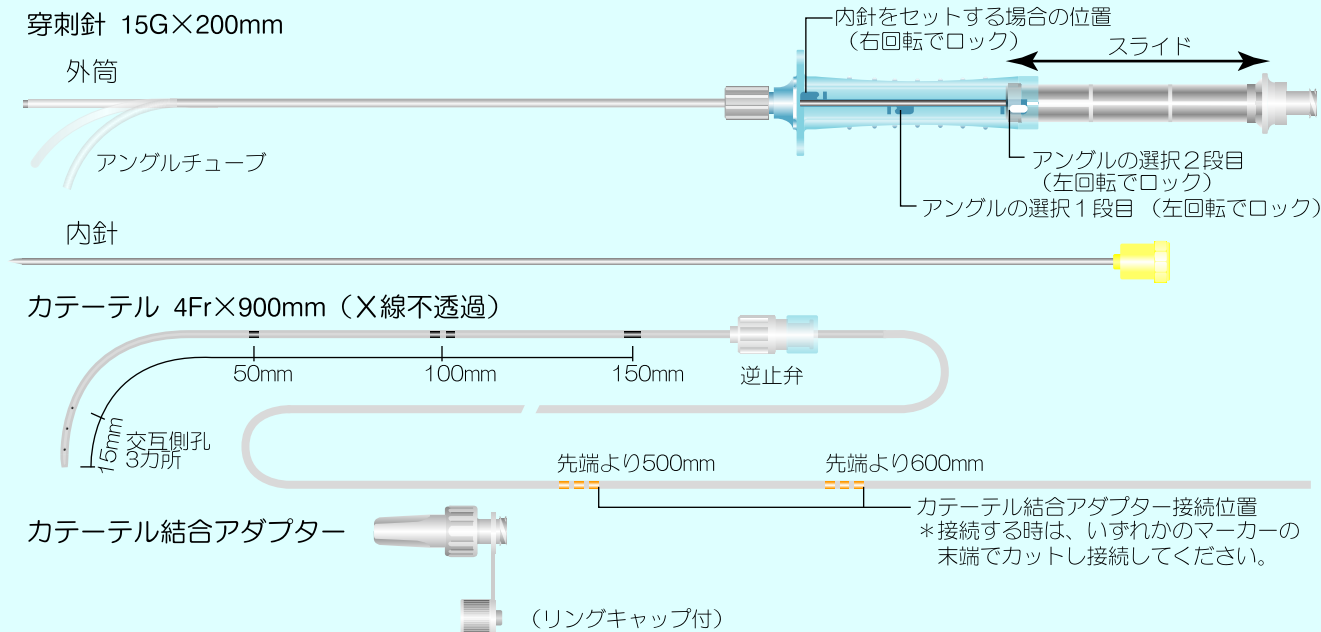

仕 様

滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル 管理医療機器

製品名	製品コード	セット内容	包装形態
J-キット	29110900	穿刺針 15G×200mm カテーテル 4Fr×900mm (X線不透過) カテーテル結合アダプター	1箱1セット入、 1セット毎ビールトレイ包装 EOG滅菌済