

<持続末梢神経ブロック用>

伝達麻酔用カテーテル
医療機器承認番号：20100BZZ00886000

ペインクリニックセット

HAKKO DISPOSABLE PAINCLINIC SET

<HR-Eタイプ>

ISO80369-6

(誤接続防止の新規格コネクタ)

適応

末梢神経近傍へカテーテルを留置し、持続的に麻酔薬の注入


特長

- イントロデューサ針には超音波反射加工（刃先10mm）に加え、絶縁コーティングを施し、超音波ガイドと神経刺激による刃先位置の確認が可能。
- イントロデューサ針には逆流防止弁付サイドポートが接続されているため手技が簡便です。

▼サイドポート

<セット内容>

- ①電極付イントロデューサ針
- ②逆流防止弁付サイドポート
- ③カテーテル
- ④フィルタ
- ⑤リニアロックコネクター
- ⑥カテーテルインサータ

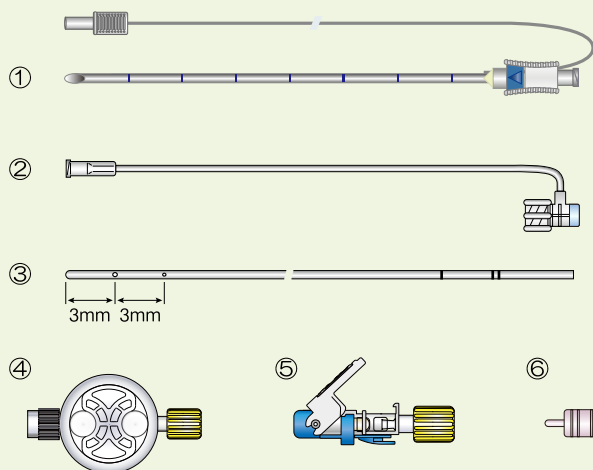

仕 様

製品コード	型式	セット内容	包装形態
27430716	HR-Eタイプ GF18EHR95-02h10	■電極付イントロデューサ針 18G×80mm ■逆流防止弁付サイドポート Φ1.0×Φ2.3×480mm ■カテーテル Φ0.8×950mm HR（X線不透過） ■フィルタ ■カテーテルインサータ ■リニアロックコネクター	1箱10セット入、 1セット毎ピールオープン包装 EOG滅菌済

・本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。