

<持続末梢神経ブロック用>

伝達麻酔用カテーテル
医療機器承認番号：20100BZZ00886000

ペインクリニックセット

HAKKO DISPOSABLE PAINCLINIC SET

<HS-Eタイプ>

ISO80369-6

(誤接続防止の新規格コネクタ)

適応


末梢神経近傍へカテーテルを留置し、持続的に麻酔薬の注入

特長


- カテーテル抜け防止のため、ピッグテールを採用。孔部位はピッグテール部分より近位のストレート部位に作製しているため、神経から離れた位置にピッグテール部分を留置することができ安全です。
- イントロデューサ針には超音波反射加工（刃先10mm）に加え、絶縁コーティングを施し、超音波ガイドと神経刺激による刃先位置の確認が可能。

イントロデューサ針の刃先▶
(通電部は刃先のエッジ部)

カテーテル拡大図

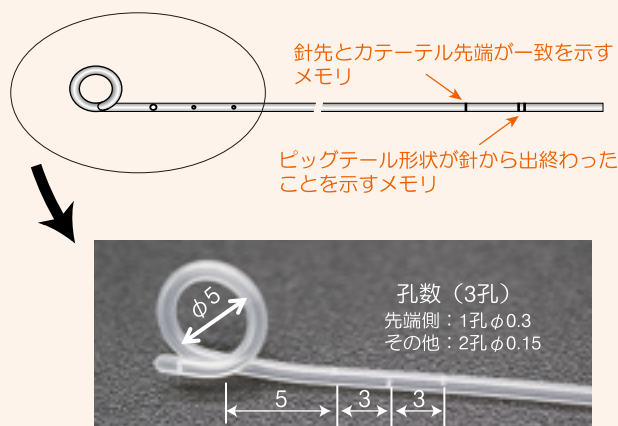

■セット内容

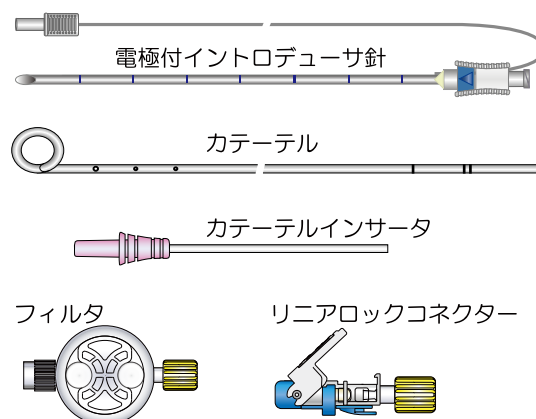

仕 様

製品コード	型式	セット内容	包装形態
27430596	HS-Eタイプ GF18EI95P5-03h40	■電極付イントロデューサ針 18G×80mm ■カテーテル(ピッグテール) Φ0.8×950mm I ■フィルタ ■カテーテルインサータ ■リニアロックコネクタ	1箱10セット入、 1セット毎ピールオープン包装 EOG滅菌済

・本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。