

# FLPトロッカー

医療機器認証番号：305ADBZX00090000 管理医療機器 単回使用トロカールスリーブ


(腹部用トロカール)  
(羊膜用トロカール)

## 適応

腹腔内および子宮腔内での内視鏡外科手術におけるトロッカーとして使用

## 特長

- 外筒は耐熱性があるため、レーザーの熱による変形を防ぎます。
- 潰れや屈曲が起こりにくい外筒であるため、胎児鏡の出し入れにおけるトラブルを低減します。
- 外筒は透明性があり、フレキシブルであるため、胎児鏡の視野を確保し、湾曲形状の胎児鏡に対応できます。
- 内針の刃先は穿刺性の高い三角錐形状。内針基の操作で刃先を収納することができるため、腹腔・子宮内や胎児の損傷リスクを低減できます。

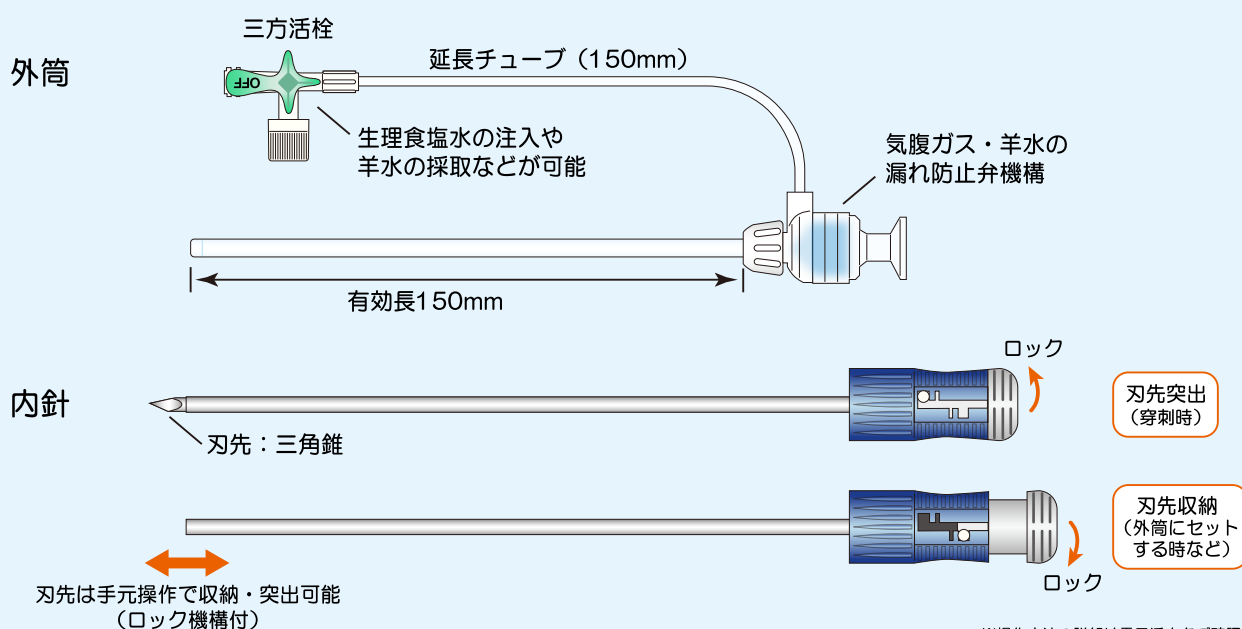

## 仕様

| 製品コード / JANコード           | 規格        | 挿入可能機器の外径  | 延長チューブ長さ      |
|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 29171000 / 4526737293110 | 4×5×150mm | Φ3.0～3.9mm | 150mm (三方活栓付) |

## 包装形態

1箱2本入、1本毎ピールオープン包装 EOG滅菌済

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。