

# イージー E・Zノズル II

医療機器認証番号：229ADBZX00064000 単回使用トロカールスリーブ 管理医療機器



5mm先端部  
(プラントタイプ)


## 用途

内視鏡下外科手術用トロッカー  
(3.7mm/5.7mm鉗子対応)


## 特長

- 弾力性に優れたバルーンと可動ストッパーで腹壁を確実に固定でき、トロッカーの逸脱を防止します。
- バルーンと可動ストッパーで止血圧迫効果が得られ、腹壁から出血や損傷を最小限に抑えることができます。
- トロッカーヘッド部がコンパクトでホールドしやすい形状です。


### 《主な構成図》

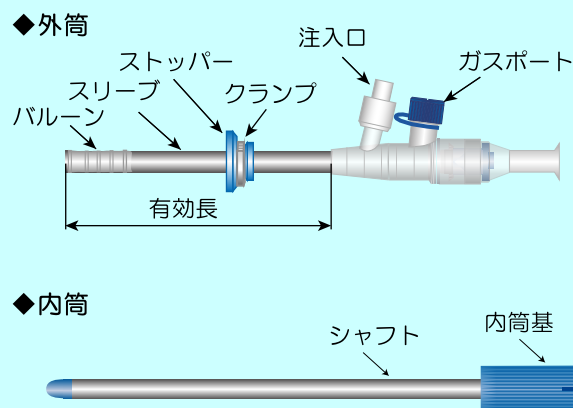


### 《シャープタイプ》 5-65mm

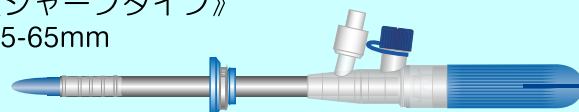

### 《プラントタイプ》 5-65mm

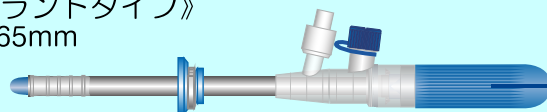

### 3.5-65mm

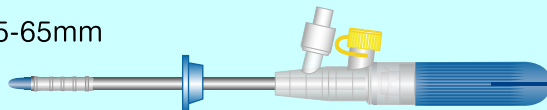

\* 3.5mmタイプはクランプは付属していません。

## 仕様

| 製品コード<br>JANコード           | タイプ                 | 有効長  | バルーン最大<br>注入量 | 鉗子類等<br>最大径 | 包装形態                             |
|---------------------------|---------------------|------|---------------|-------------|----------------------------------|
| 29172000<br>4526737292533 | 5-65mm<br>シャープタイプ   | 65mm | 10mL          | φ5.7mm      | 1箱2本入、<br>1本毎ピールオープン包装<br>EOG滅菌済 |
| 29172010<br>4526737292540 | 5-65mm<br>プラントタイプ   | 65mm | 10mL          | φ5.7mm      |                                  |
| 29172020<br>4526737293134 | 3.5-65mm<br>プラントタイプ | 65mm | 4mL           | φ3.7mm      |                                  |