


ラッププロテクター

LAP PROTECTOR

医療機器認証番号：21900BZX00940000 管理医療機器 単回使用開創器

NEW Type

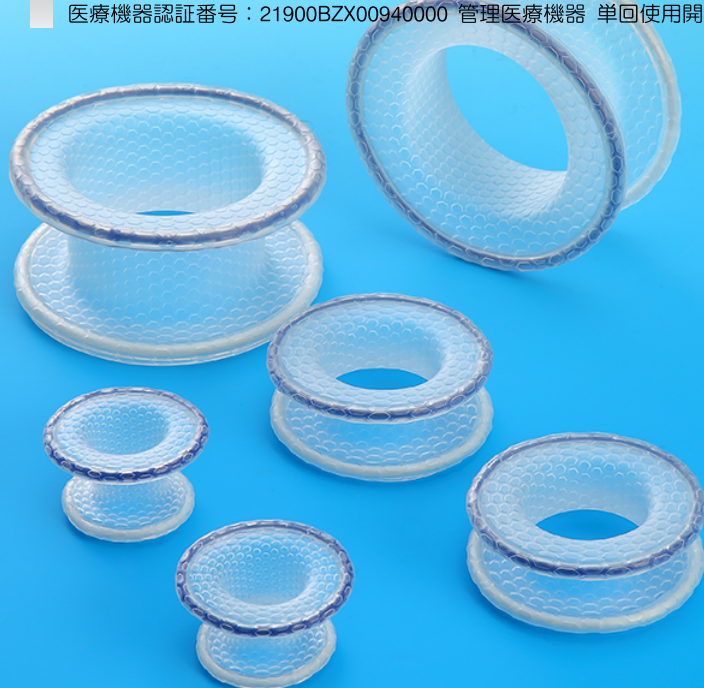

適応 小切開手術における切開創の開創器具としての使用

特長

- ハニカム構造（ハニカムシース）の特殊膜を採用。柔軟性と強度を最適化。
- 素材の張力によって切開創を開口させるため、十分な視野の確保が可能です。
- 切開創全体に比較的均一に力が加わり、開創による組織の挫滅や損傷を起こしにくい状態で開口させることができます。
- 切開創を開創保持する助手の介助の必要性が低減します。

上リング：ブルー

ハニカムシース

下リング：ホワイト

<特許出願中>

ハニカムシース

複数の小さな六角型が密接に連携した特殊構造（膜）を採用

■ 型式：Hx0504

ミニミニタイプ

上リング：Φ50mm

下リング：Φ40mm

■ 型式：Hx0707

ミニタイプ

上リング：Φ70mm

下リング：Φ70mm

■ 型式：Hx1010

100mm タイプ

上リング：Φ100mm

下リング：Φ100mm

仕様

製品コード / JANコード	型式	体壁の厚さ	皮切の大きさ	切開創の大きさ
29150700 / 4526737293172	Hx0504 ミニミニタイプ	5cm以下	1cmから2cm	1cmから2cm
29150710 / 4526737293189	Hx0707 ミニタイプ		2cmから4cm	3cmから4cm
29150720 / 4526737293196	Hx1010 100mmタイプ		3cmから6cm	4cmから6cm

包装形態

1箱2個入、1個毎ピールオープン包装 EOG滅菌済

・本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。