


医療機器認証番号：307ADBZX00066000

一般的名称：薬液注入用針 (70205000) 管理医療機器

八光インサージョンニードル

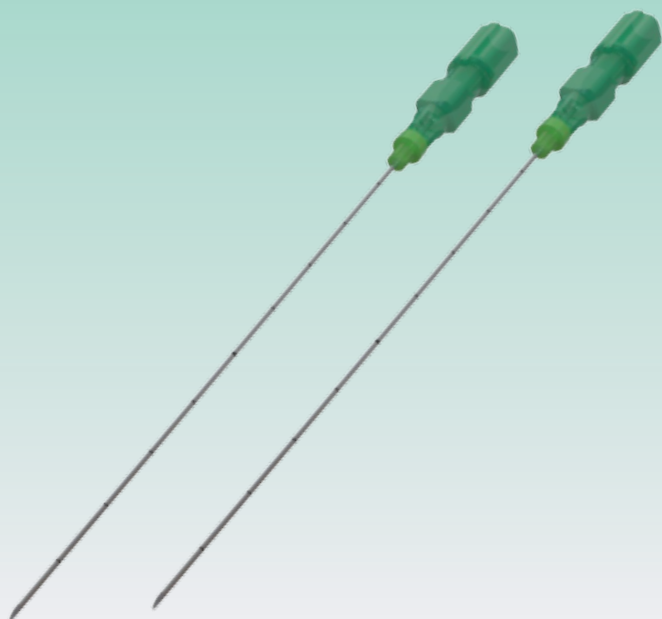

用途

X線透視ガイド体腔、臓器又は組織への薬液注入

特長

深部穿刺に求められる”操作性”と”注入性”を両立


- 実績のあるSB^{*}バックカット刃を採用し、優れた直進性を実現。また、刃面はSBで刃長が短いいため組織損傷を抑制します。
- 導入針としても使用可能です。
- 針基は、耐薬品性に優れた材料を採用しています。

*SB：ショートベベル


使用例

■椎間板内酵素注入療法

注射で飛び出した髄核を小さくして神経への圧迫を軽減する治療法

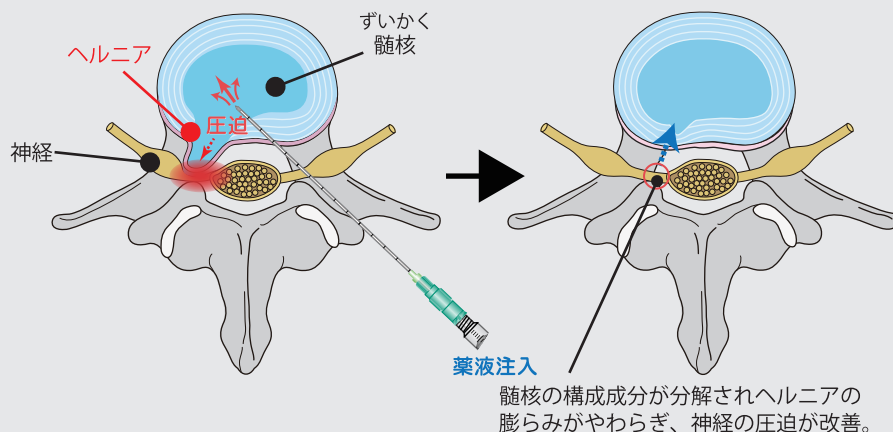

<製品仕様>

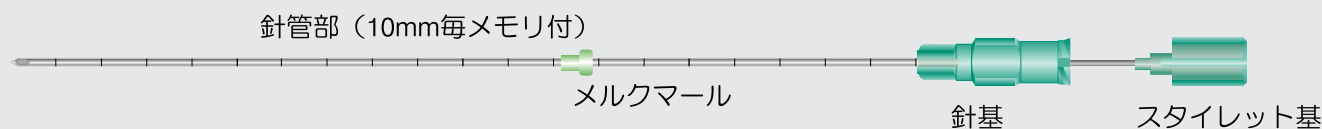

仕様

製品コード / JANコード	規格	包装形態
22411010 / 4526737224367	B型 0.8 (21G) × 150mm SB-B-U0000-MM	1箱 5本入、EOG滅菌済
22411030 / 4526737224381	B型 0.8 (21G) × 200mm SB-B-U0000-MM	1本毎ピールオープン包装

・本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。